

## Auditoria Por Guia

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde Versão 11	<b>Data da publicação</b>	: 11/09/14
<b>Chamado</b>	: SAUDE063	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos Relacionais
<b>País(es)</b>	: Brasil		

### **Importante**

Esta melhoria depende da execução do *update* de base **U\_UPDPLS37** conforme **Procedimentos para Implementação**.

Realizada melhoria com a nova rotina auditoria **Por Guia (PLSA790V)** que permite o controle de acordo com o perfil do operador do sistema em conjunto com o perfil informado na crítica cadastrada em **Motivos Críticas (PLSA505)**. Ela disponibiliza um controle de demanda diferenciada por requerimento, auditoria participativa, encaminhamento de análise para outro departamento, controle de anotações, banco de conhecimento na guia e monitor de documentos de guia. Sua utilização requer que o parâmetro **MV\_PL790NE** esteja ativo para todas as críticas que necessitam de análise da auditoria, Com a configuração do parâmetro a auditoria do modo "antigo" será utilizada somente para o processo de PTU On-line. Ao executar a rotina de auditoria **Por Guia (PLSA790V)**, ela é automaticamente atualizada em um determinado período de tempo, definido no parâmetro **MV\_PLSATSE**.

Auditoria por procedimento	Auditoria por Guia
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilidade de auditar apenas por procedimento</li> <li>• Opções contidas nos botões Contrato, RDA, Críticas e etc, são utilizados apenas para visualizações.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A auditoria pode ser feita nos procedimentos de acordo com a guia escolhida.</li> <li>• As guias podem ser por demanda, participativa e tratada por interna-Saúde.</li> <li>• Pode ser encaminhada para outros setores.</li> <li>• Possibilidade de incluir anotações na guia para futuras consultas.</li> <li>• Possibilidade de transferência para demanda.</li> <li>• No momento em que a guia que esta sendo auditada, ela fica bloqueada para outros auditores.</li> <li>• É possível visualizar se a guia foi auditada totalmente ou parcialmente.</li> <li>• É possível alterar a prioridade da guia.</li> <li>• É possível inserir arquivos no banco de conhecimento de</li> </ul>

	cada guia.
--	------------

Para contemplar a utilização da auditoria **Por Guia (PLSA790V)** estão disponíveis os Pontos de Entrada:

- **PLSAUDBT**: utilizado para visualizar e/ou alterar itens do procedimento. Sua chamada é feita na rotina **Por Guia (PLSA790V)**, através da opção **Ações Relacionadas** onde a guia está posicionada.
- **PLSAUDFI**: retorna um filtro de pergunta personalizado. Sua chamada é feita na rotina **Por Guia (PLSA790V)** ao selecionar o item **Personalizar**, localizado em **Ações Relacionadas**.
- **PLSAUDPR**: retorna a prioridade da guia para análise da auditoria. Sua chamada é feita na montagem dos registros da rotina **Por Guia (PLSA790V)**.

**Observação:** os Pontos de Entrada podem ser consultados no endereço <http://tdn.totvs.com>. Selecione as opções Softwares de Gestão / Linha Microsiga Protheus / Saúde / Gestão de Plano de Saúde / Ponto de Entrada.

### Operador Sistema (PLSA980)

Nessa rotina estão disponíveis os campos que devem ser preenchidos para definir as informações do operador do sistema na rotina de auditoria **Por Guia (PLSA790V)**.

### Tabela padrão (PLSA940)

Foram criados dois campos para classificar o procedimento como: Demanda Referenciada ou Participativa.

- **Requerimento (BR8\_REQUER)**: define se o procedimento é uma demanda referenciada. Dessa forma, ele é incluído na pasta **Demanda** na rotina de auditoria **Por Guia (PLSA790V)**.
- **Participativ (BR8\_PARTIC)**: define se o procedimento é do tipo participativa. Dessa forma, ele é incluído na pasta **Participativa** na rotina de auditoria **Por Guia (PLSA790V)**.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Antes de executar o compatibilizador **U\_UPDPLS37** é imprescindível:

- a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11\_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM”).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus Smart Client**, digite **U\_UPDPLS37** no campo **Programa Inicial**.

### **! Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **U\_UPDPLS37** seja igual ou superior a 03/04/2012.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do **U\_UPDPLS37**. Selecione a empresa desejada e confirme o **U\_UPDPLS37**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O **U\_UPDPLS37** cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
<b>Informações</b>	
<b>Nome</b>	MV_PL790NE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	( 0= Não, 1= Sim)
<b>Descrição</b>	
<b>Descrição</b>	Ativa a nova Auditoria (Auditoria Por Guia) a antiga somente <b>Reg Online</b> .

Itens/Pastas	Descrição
<b>Informações</b>	
<b>Nome</b>	MV_PLSATSE
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Cont. Por.</b>	240
<b>Descrição</b>	
<b>Descrição</b>	Determina o tempo para atualização da tela de auditoria por guia (Segundos)

Itens/Pastas	Descrição
<b>Informações</b>	
<b>Nome</b>	MV_PLSENSE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	3
<b>Descrição</b>	
<b>Descrição</b>	Define o código do segmento padrão

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Plano de Saúde**, conforme instruções a seguir:

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Auditoria
<b>Nome da Rotina</b>	Por Guia
<b>Programa</b>	PLSA790V
<b>Módulo</b>	Plano de Saúde
<b>Tipo</b>	1
<b>Tabelas</b>	B53 B68 B70 B71 B72 B73 BD6 BY5 B47

- Altere a descrição do Menu:

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Auditoria
<b>Nome da Rotina</b>	De: Auditoria Conta Para: Por Procedimento
<b>Programa</b>	PLS790MOV

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Auditoria
<b>Nome da Rotina</b>	De: Movto Auditoria Para: Movimento
<b>Programa</b>	PLSA790

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### Pré-Requisito

Executar UPDPLS80, referente a FNC : Sequencial da Crítica de Atendimento

### Arquivo .DOT

Crie uma pasta de nome DOT na raiz do servidor, para inserir o arquivo PLSPROCESSO.DOT (contido no pacote do requisito).


Este arquivo é um modelo de documento para composição de um possível contrato para atender a demanda por requerimento, executado na pasta **Demanda** na auditoria **Por Guia (PLSA790V)**. O DOT é aberto automaticamente com informações do sistema, como por exemplo, dados usuário. Ao executar as rotinas de **Sinistralidade (PLSC010)** e **Lotes de Pagamento (PLSA470)** é possível verificar no documento o que foi gasto e pago pelo usuário.

### Configurador (SIGACFG)

1. Acesse **Configurador/Cadastros/Tabelas (CFGX016)**, para criar consulta na tabela SX5 (o código das tabelas devem ser criados com três posições). O usuário deve incluir opções, de acordo com as características da sua empresa, para as seguintes tabelas:
  - BL – Departamento.
  - BM – Cargo.
  - C6 – Segmento.
  - C7 – Tipo de Inconsistência.
  - BZ – Anotação.
  - BV – Tipo Processo.Exemplo: Departamento – Auditoria.
2. Acesse **Configurador / Cadastros / Menus (CFGX013)**. O usuário pode alterar o Menu da **AUDITORIA** e manter apenas a rotina **Por Guia (PLSA790V)**, quando não há intercâmbio *on-line*, pois com o parâmetro **MV\_PL790NE** ativado, a auditoria **Por Procedimento (PLS790MOV)** registra somente guias desse tipo intercâmbio.
3. Acesse **Configurador / Senha / Usuários (CFGAS10)**. Preencha o campo **Email (USR\_EMAIL)** referente ao contato do operador do módulo **Plano de Saúde**. Essa informação é utilizada ao executar o item **Enviar Email**, localizado na pasta **partipativa** da rotina **Por Guia (PLSA790V)**. Para esse procedimento, também devem ser configurados os seguintes parâmetros:
  - **MV\_PORSMTTP**: informe a porta do servidor SMTP.
  - **MV\_RELSERV**: nome do servidor do envio de e-mail.
  - **MV\_RELUSR**: usuário para autenticação no servidor de e-mail.
  - **MV\_RELAPSW**: senha da conta de e-mail para envio de relatórios.
  - **MV\_RELFROM**: Conta de email do remetente padrão.
  - **MV\_RELTIME**: *timeout* no envio de e-mail.
  - **MV\_RELTLS**: informe o servidor de SMTP.
  - **MV\_RELAUTH**: servidor de e-mail necessita de Autenticação?
  - **MV\_DIRDOC**: diretório destino onde são armazenados os arquivos do banco de conhecimento.

### Operador Sistema

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Operadora / Operador Sistema (PLSA980)**.
2. Selecione o Usuário que receberá a configuração para utilizar a auditoria e clique em alterar.

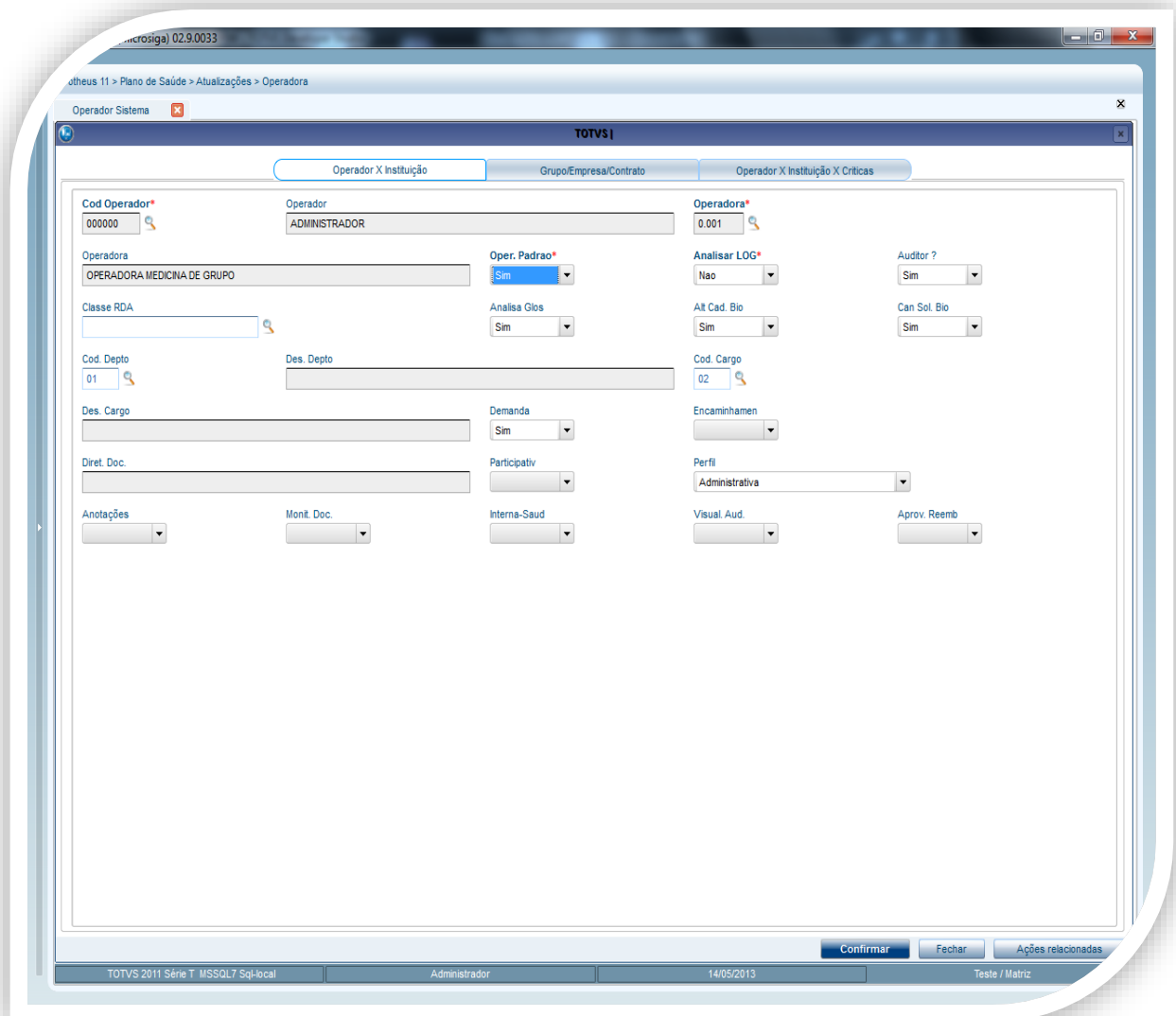

3. Preencha os campos que devem ser utilizados na auditoria **Por Guia (PLSA790V)**:

- **Perfil (BX4\_PERAUD)**: apresenta as opções:

0 = Operacional.

1 = Técnica.

2 = Administrativa: auditoria das críticas (pode auditar todas as glosas).

**Observação:** as opções 0, 1 e 2 são utilizadas para auditoria das críticas. A Opção 2 “Administrativa” tem privilegio maior que os outros perfis dando direito de analise nas criticas com **Tipo (BCT\_TIPO) 0, 1 e 2.**

- **Interna-Saud (BX4\_INTSAU)**: operador de interna-saude (Sim/Não).
- **Anotações (BX4\_ANOTAC)**: utiliza anotações (Sim/Não).
- **Monitor de Documentos (BX4\_MOTDOC)**: utiliza monitor de documentos (Sim/Não).
- **Vizualizacao da Auditoria (BX4\_VISAUD)**: Apenas vizualizar registro da auditoria (Sim/Não).
- **Encaminhamento (BX4\_ENCMIN)**: utiliza o encaminhamento (Sim/Não).

- **Participativa (BX4\_PARTIC):** utiliza a participativa (Sim/Não).
- **Demanda (BX4\_PROCES):** utiliza a demanda (Sim/Não).
- **Cod Depto (BX4\_CODDEP):** código do departamento do operador.
- **Cod Cargo (BX4\_CODCAR):** código do cargo do operador.
- **Diret Doc (BX4\_DIRDOC):** caminho do diretório onde encontra os documentos das guias.

## **Importante**


- Enquanto estiver habilitado a opção de visualização da auditoria, não será possível utilizar a opção de interna-saúde.
- Enquanto estiver habilitado a opção de visualização da auditoria, no ações relacionadas da auditoria apenas as opções **banco de conhecimento** e **relacionados** estarão disponíveis.

Enquanto estiver habilitado a opção interna-saúde, no ações relacionadas da auditoria apenas as opções **banco de conhecimento, relacionados, alt. Prioridade, neg. participação, transf. p/ demanda e part. Honorários médicos itens** estarão disponíveis.

## Motivos Críticas


1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Cadastro de Contas / Motivos Críticas (PLSA505)**.
2. Selecione a crítica e clique em alterar.
3. Preencha o campo **Tipo (BCT\_TIPO)** com das seguintes opções:
  - 0 = Operacional.
  - 1 = Técnica.
  - 2 = Administrativa.



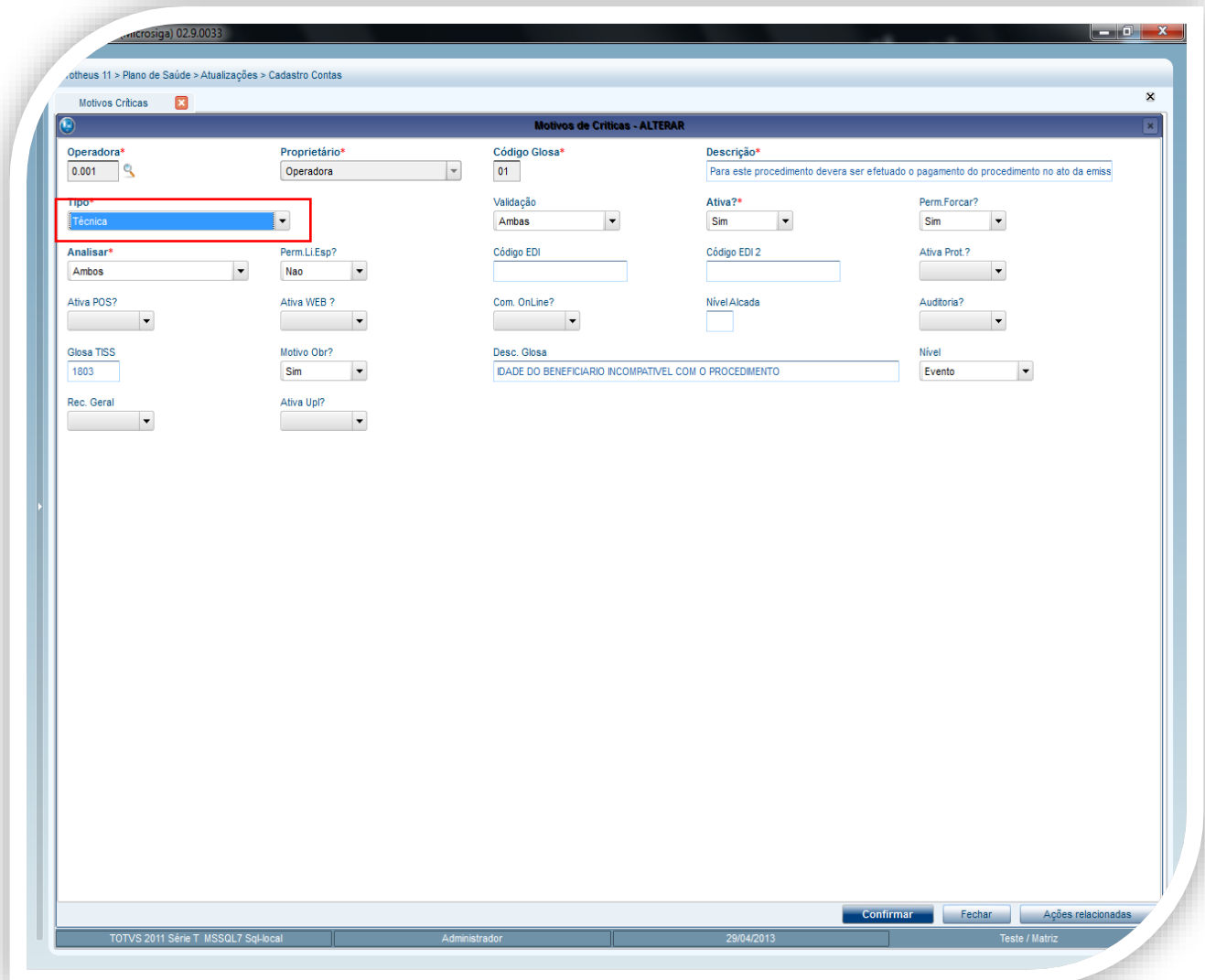

### Tabela Padrão


1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Procedimentos / Tabela Padrão (PLSA940)**.
2. Selecione o evento e clique em alterar.
3. Clique na pasta **Outros** e preencha os campos:
  - **Requerimento (BR8\_REQUER)**: informe a opção **Sim** para configurar procedimento de demanda. Na análise de autorização da guia é gerada a crítica **"Demanda por requerimento"**, quando o procedimento apresentar a opção **Sim**.
  - **Participativ (BR8\_PARTIC)**: informe a opção **Sim** para configurar procedimento do tipo **participativa**.

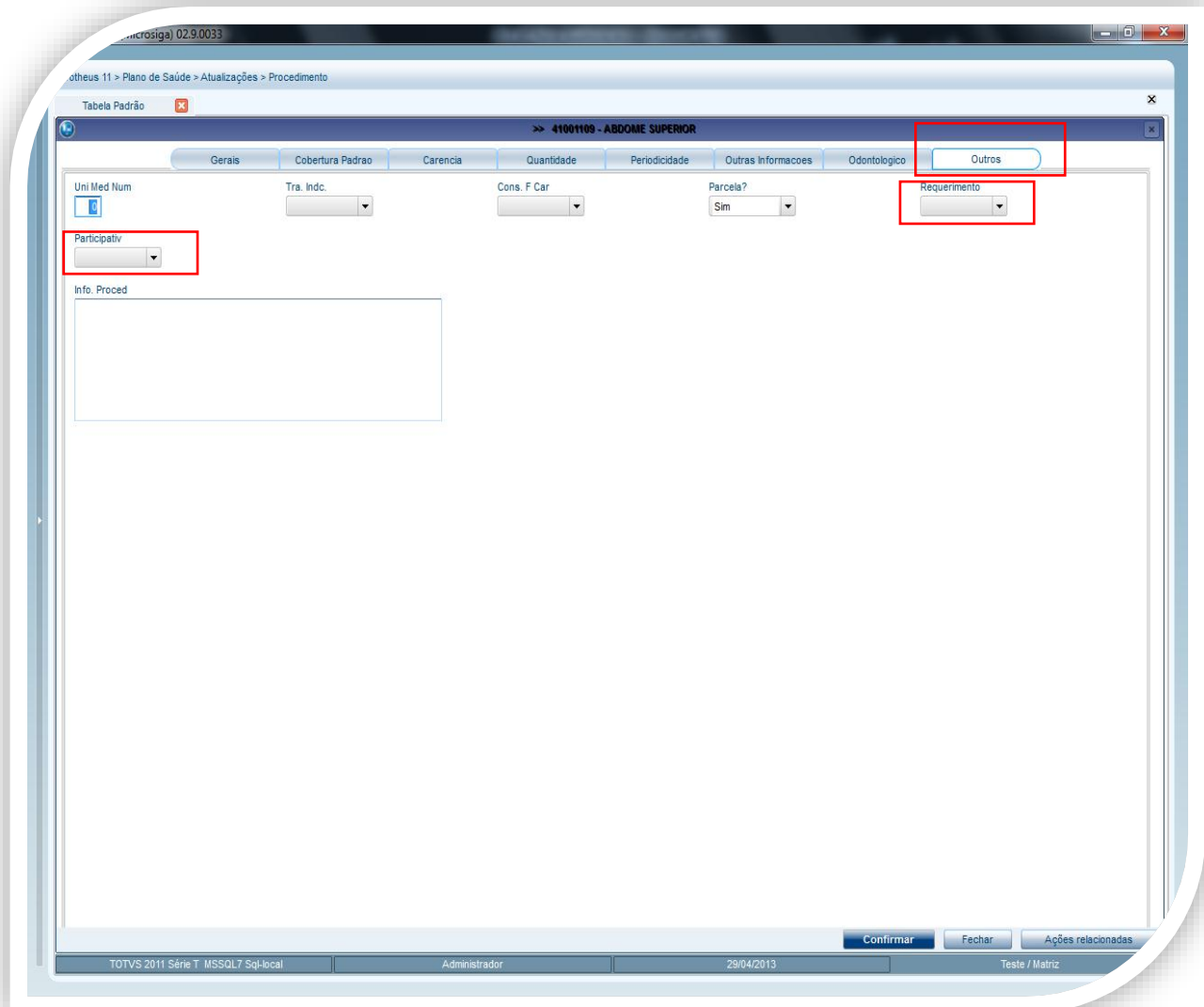

### Rda-Cadastro


1. No módulo **Plano de Saúde Atualizações/ Rede Atendimento / Rda-Cadastro (PLSA360)**.
2. Selecione a rede de atendimento e clique em alterar.
3. Clique na pasta **Outros**.
4. Preencha o campo **Aceita Part. (BAU\_ACEPAR)** com a opção **Sob Consulta**. Sem essa opção, a guia não é recusada, porém fica disponível no monitor de análise da auditoria.

**Observação:** é gerada a crítica "**Auditoria Participativa**" quando os campos **Participativ (BR8\_PARTIC)** e **Aceita Part. (BAU\_ACEPAR)** apresentarem conteúdo igual a **Sim** e **Sob Consulta**, respectivamente.

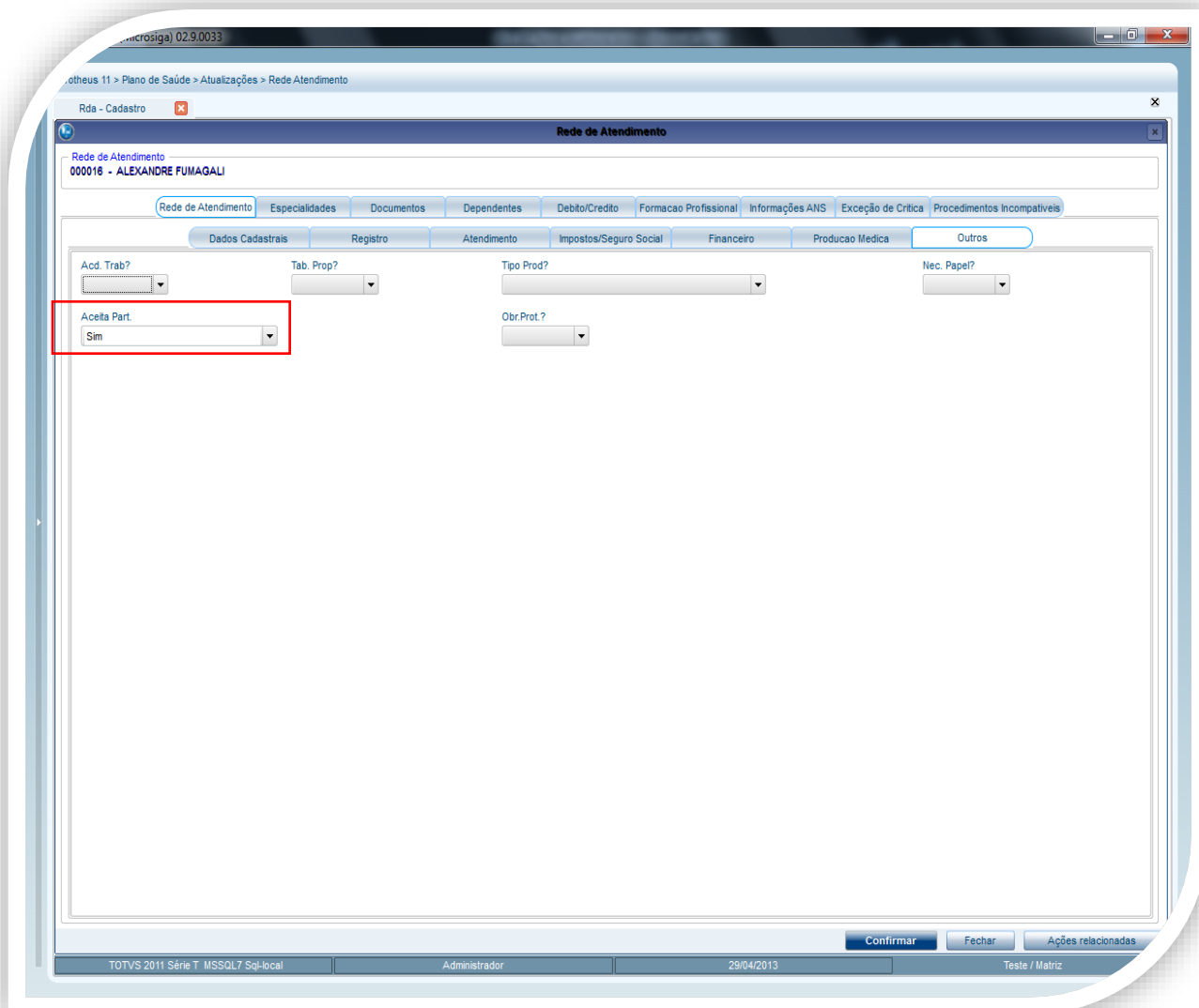

#### Envio de um procedimento para auditoria Por Guia

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Atendimento / Liberação (PLSA094B)**, **Liberacao Odonto. (PLSA094D)**, **Autorização SADT (PLSA094A)**, **Autorização Odonto. (PLSA094C)** ou **Internação (PLSA092)** .
2. Clique em **Incluir**.
3. Preencha os dados conforme orientações do *help* de campo.
4. Ao finalizar, a guia é enviada para auditoria **Por Guia (PLSA790V)**.

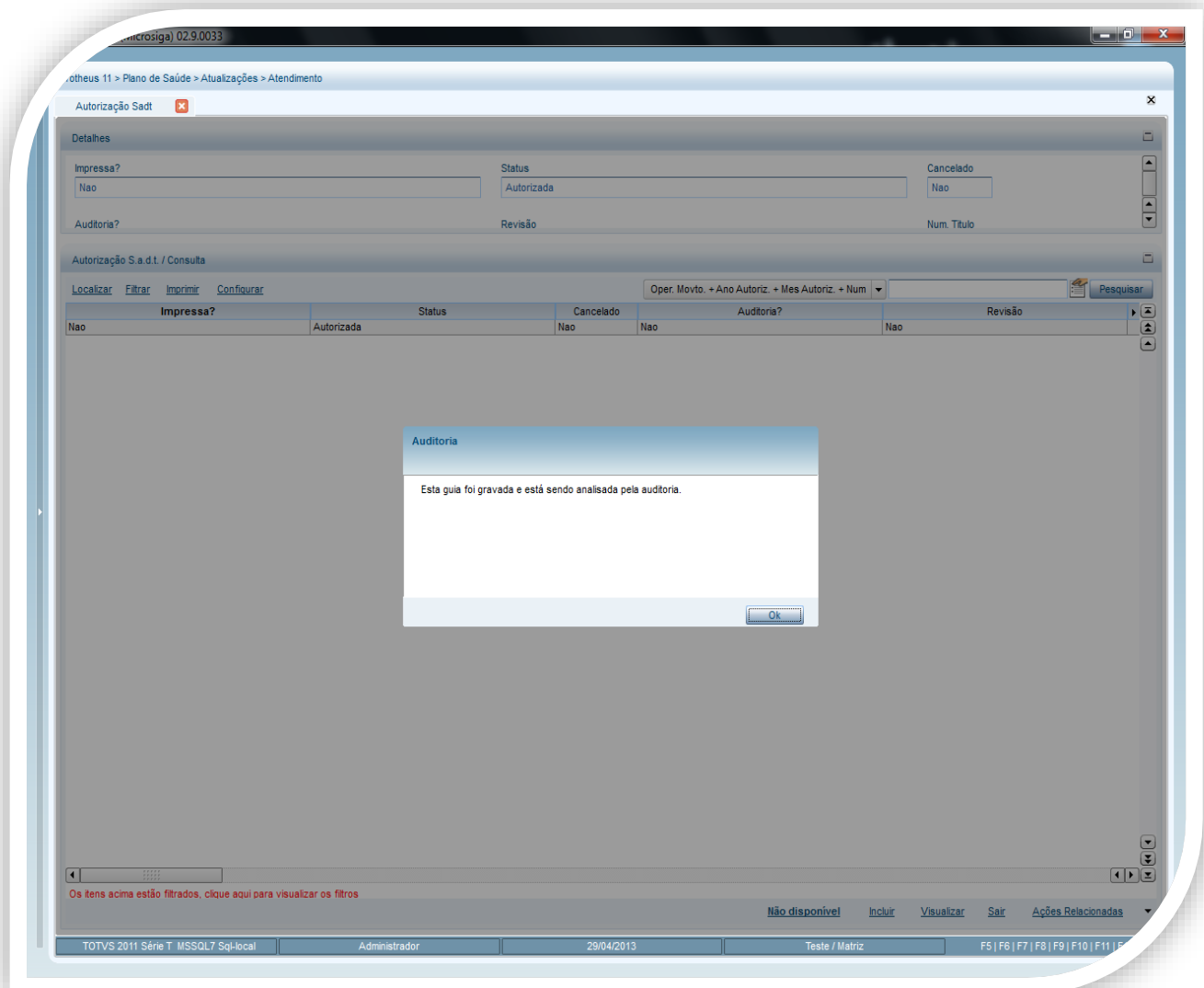

**Observação:** é necessário que o cadastro **Motivos Críticas (PLSA505)** apresente uma crítica habilitada, assim como, no atendimento deve ser incluído um procedimento com essa crítica para que ele seja negado e enviado à auditoria.

As etapas realizadas na **Autorização SADT (PLSA094A)** também podem ser feitas na **Internação (PLSA092)**, **Autorização Odontológica (PLSA094C)** e **Autorização Reemb. (PLSA001)**.

### Auditoria Por Guia

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Auditoria / Por Guia (PLSA790V)**.


São exibidas as seguintes pastas:

- **Demanda:** utilizado quando a guia tem pelo menos um procedimento de demanda por requerimento. Exemplo: solicitação de passagem aérea para atendimento em outro Estado.

#### Opções da pasta


- **Incluir** – Incluir demanda

- **Alterar** – alterar demanda.
- **Banc. Processo** – banco de conhecimento.
- **Ações relacionadas:**
  - **Visualizar** – Visualizar demanda.
  - **Excluir** – Excluir demanda.

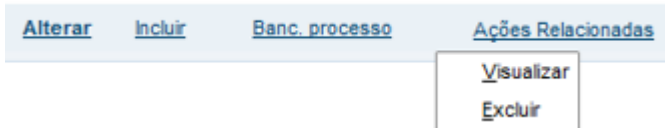


#### Na pasta demanda:

1. Clique em incluir

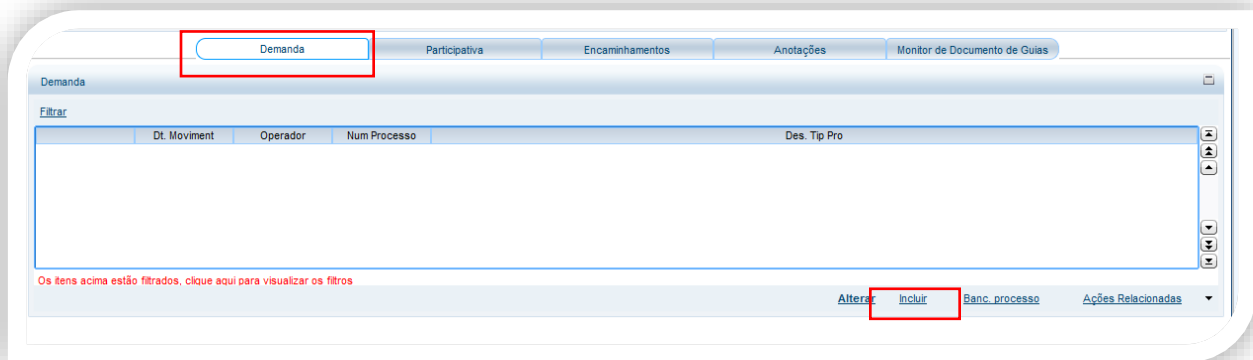

2. Insira o código do tipo de processo

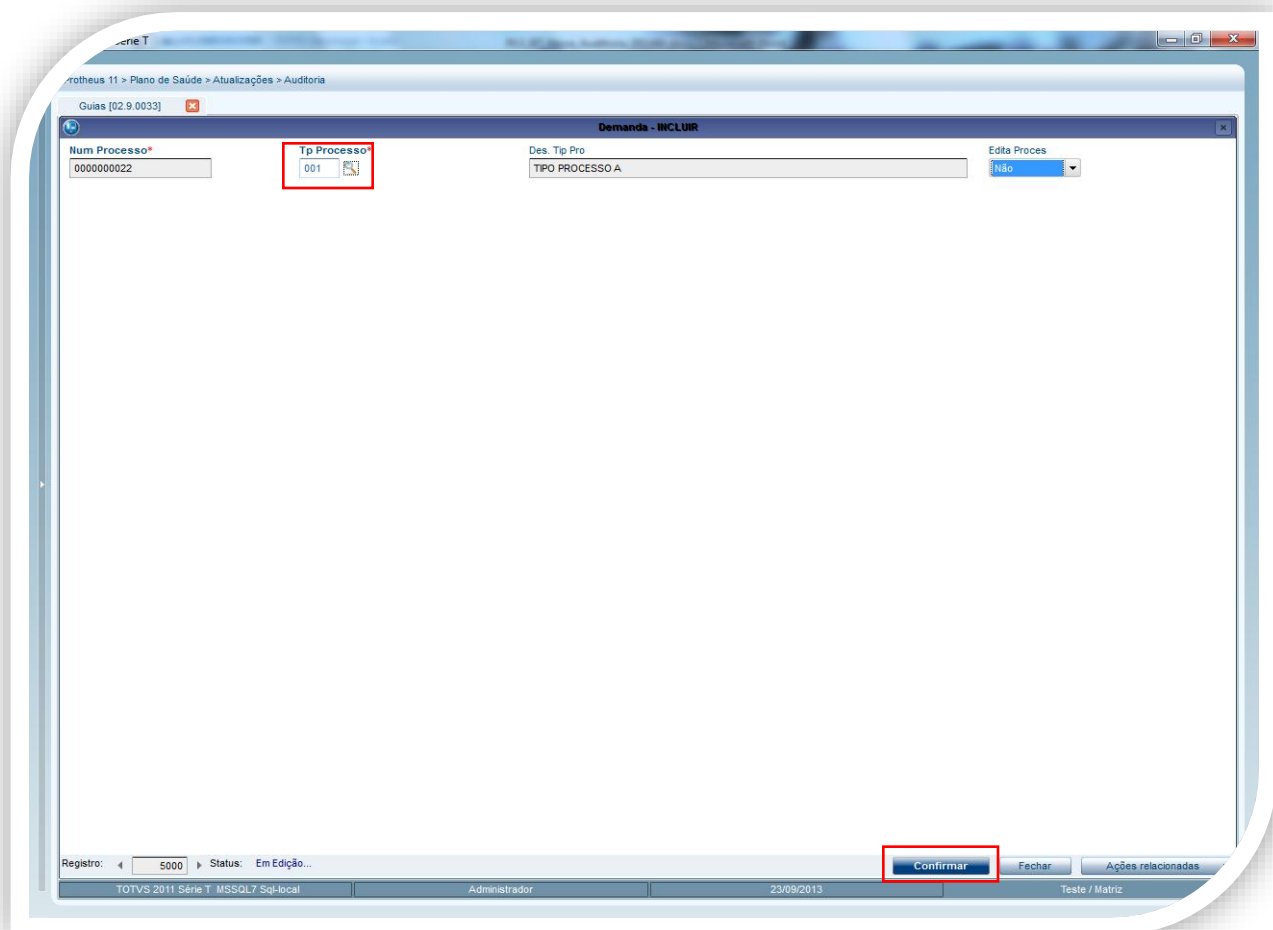

Tp Processo – Tipo do processo

Edita Proces. – Permite editar o processo

3. Clique em confirmar

- **Participativa:** utilizada quando a guia tem procedimento participativo. Nela está disponível o item **Enviar EMAIL**, para o operador agendado.

Exemplo: procedimento que necessita do acompanhamento de um auditor interno na sala de cirurgia ou que ele fique aguardando fora dela.

#### Opções da Pasta

- **Incluir** – Incluir participativa.
- **Alterar** – Alterar Participativa.

- **Enviar E-Mail** – envia um e-mail (Configuração de e-mail descrito no pré-requisito) para o operador agendado com as informações abaixo:


### Auditoria Participativa - Agendamento

Beneficiário: 00010004000011018 - ANITA TITULAR  
Rede de Atendimento: 000001 - RDA GENERICA  
Numero da Guia: 000120140200000068  
Realização: 25/02/2014 - 18:06  
Agendamento: 25/02/2014 - 18:06


- **Ações relacionadas:**
  - **Visualizar** – Visualizar demanda.
  - **Excluir** – Excluir demanda.

#### Na pasta participativa:

1. Clique em incluir

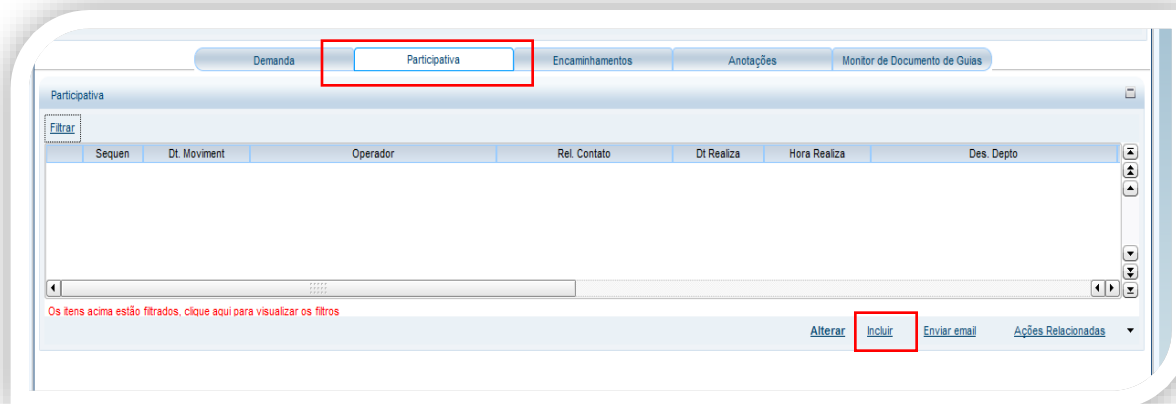

2. Insira as informações nos campos obrigatórios.

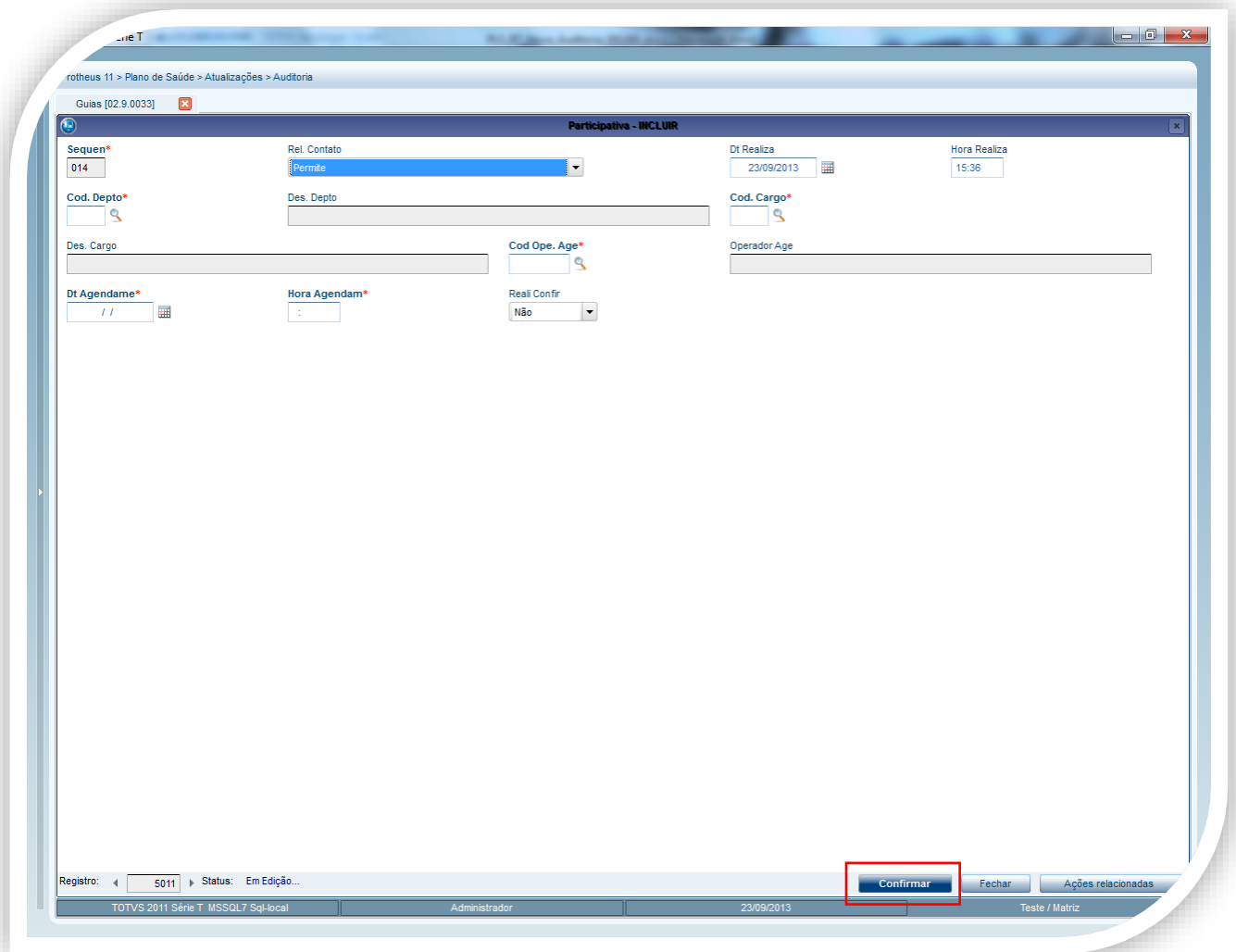

Participativa - INCLUR

Sequen\* 014

Rel. Contato Permite

Dt Realiza 23/09/2013

Hora Realiza 15:36

Cod. Depto\*

Des. Depto

Cod. Cargo\*

Des. Cargo

Cod Ope. Age\*

Operador Age

Dt Agendame\* //

Hora Agendam\*

Real Confir Não

Registro: 5011 Status: Em Edição...

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T MSSQL7 Sql-local Administrador 23/09/2013 Teste / Matriz

Rel. Contrato - Se permite ou não Realizar Contato.

Dt. Realiza – Data da realização do contato.

Hora Realiza - Hora da Realização.

Cod. Departamento - Código do departamento referente a tabela BL do SX5.

Cod. Cargo - Código do cargo referente a tabela BM do SX5.

Cod. Ope. Age. - Código do Operador Agendado.

Dt. Agendame - Data do Agendamento.

Hora agendam - Hora do agendamento.

Real. Confir. - Auditoria Participativa foi realizada (Não; Sim).


3. Clique em confirmar.




### ! Importante

É possível visualizar quais dos procedimentos são de auditoria participativa.


Ao clicar em analisar.

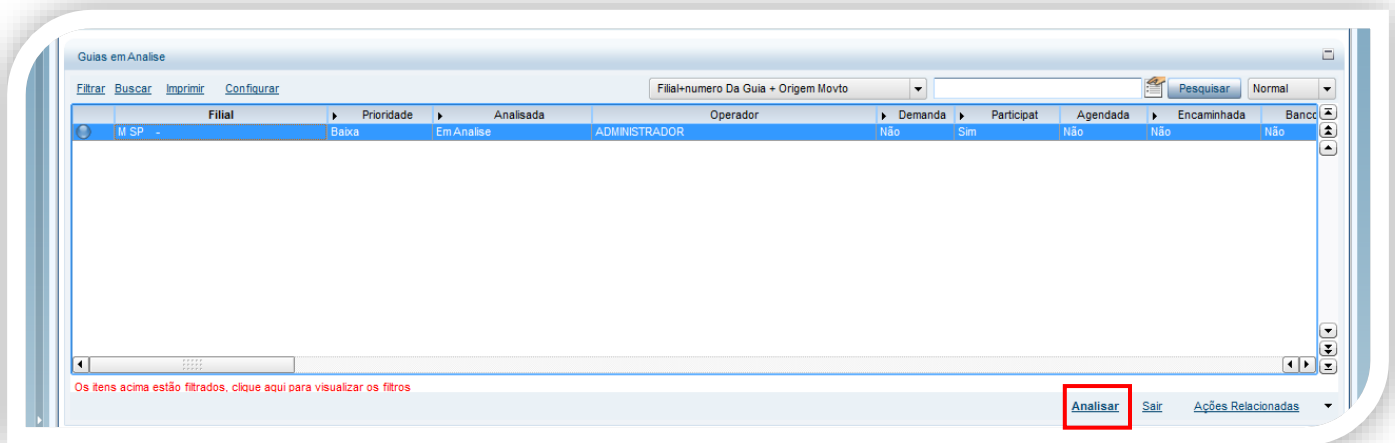

Corra a barra de rolagem até o final e verifique na coluna Partic. De acordo com a linha selecionada se o procedimento é participativo.

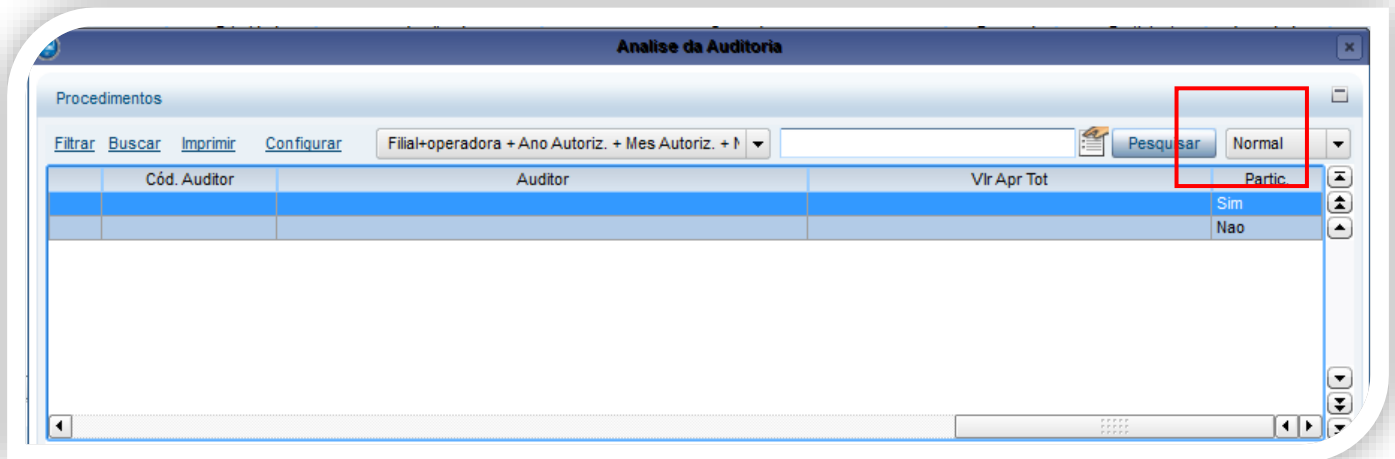


Caso exista uma participativa criada e a realização da auditoria participativa ainda não foi confirmada, no momento da análise do procedimento participativo, a seguinte mensagem é visualizada na tela:

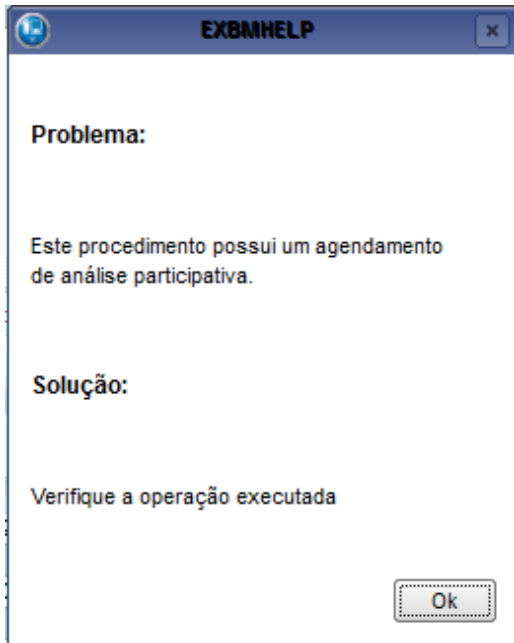


- **Encaminhamento:** relacionado a encaminhamento para outro departamento. Exemplo: análise de uma das críticas é de competência de outro departamento.

**Na pasta Encaminhamento:**

1. Clique em incluir

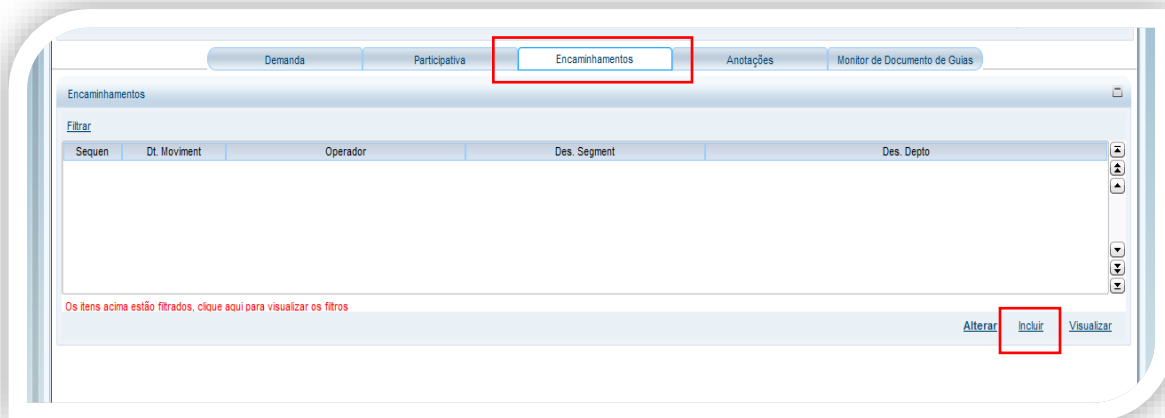

2. Insira as informações nos campos obrigatórios.

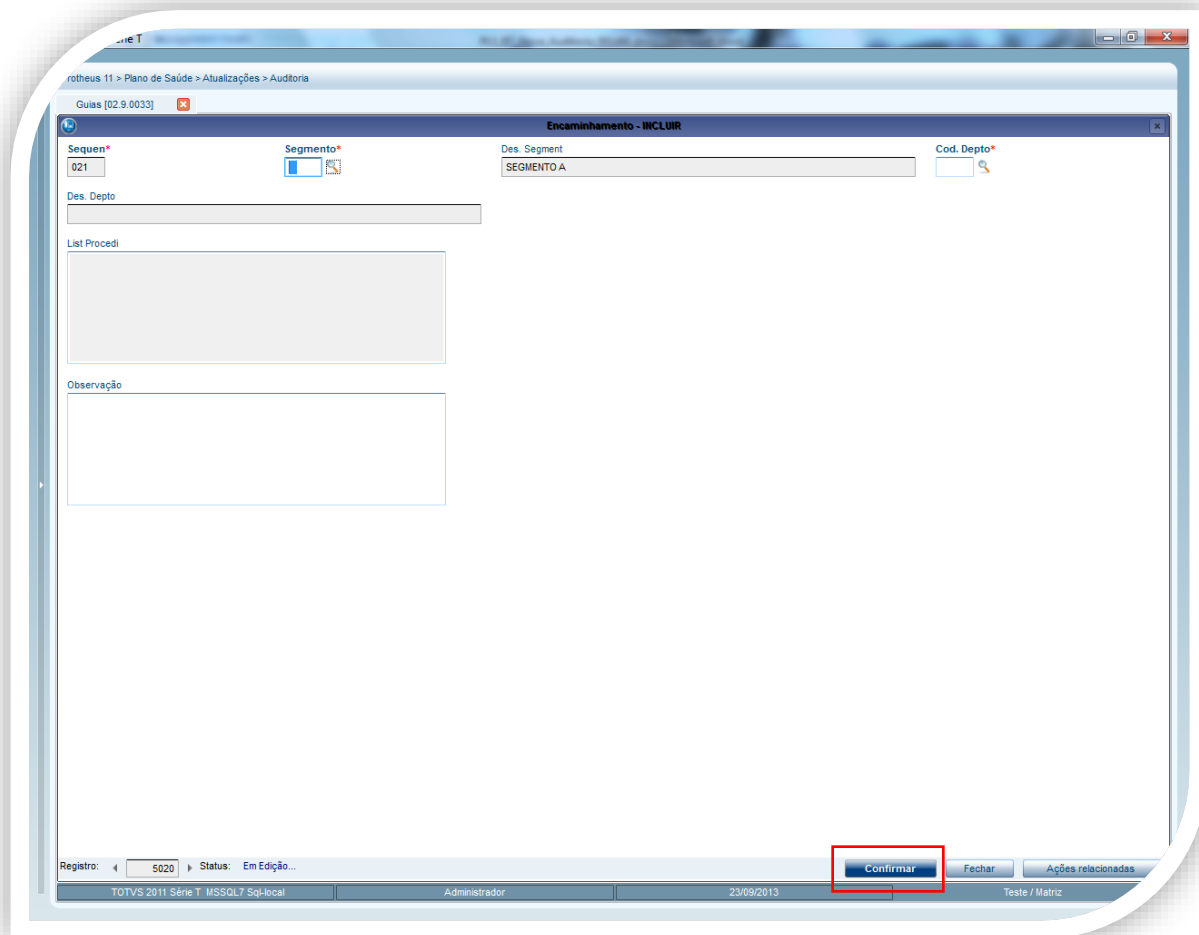

Segmento - Código do Segmento Tabela C6 do SX5.


Cod. Dpto - Código do departamento referente a tabela BL do SX5.

3. Clique em confirmar.


#### List de procedimentos (opção do ações relacionadas dos folders encaminhamento e anotações)

É possível incluir a lista dos procedimentos da guia no campo **List Procedi(B71\_LISPRO / Encaminhamento)** e **List Proced(B69\_LISPRO / Anotações)** para frizar na observação.

1. Clique em ações relacionadas/ Lista de Procedimentos

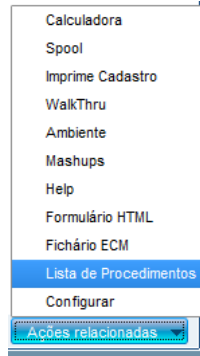

2. Selecione os procedimentos que deseja e clique em confirmar.

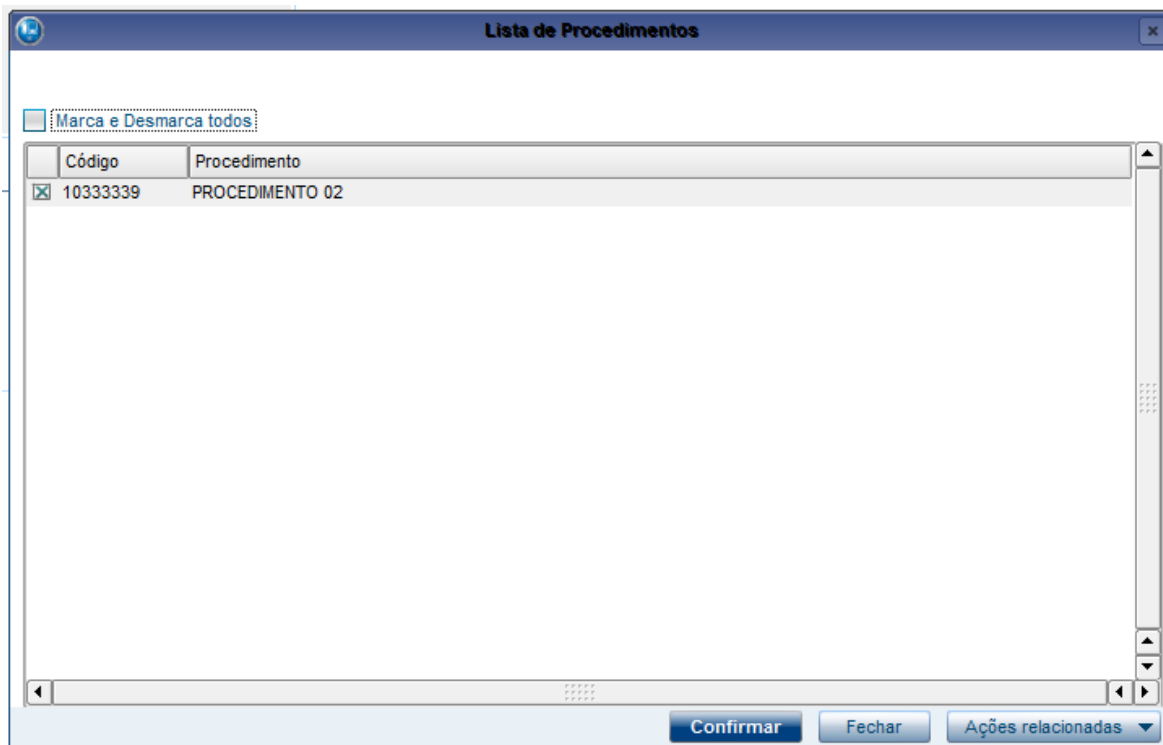


Todos os procedimentos selecionados são visualizados no campo List Proc.


**Anotações:** referente à guia. Exemplo: informações sobre o atendimento, guia ou complementos.

**Na pasta Anotações:**

1. Clique em incluir

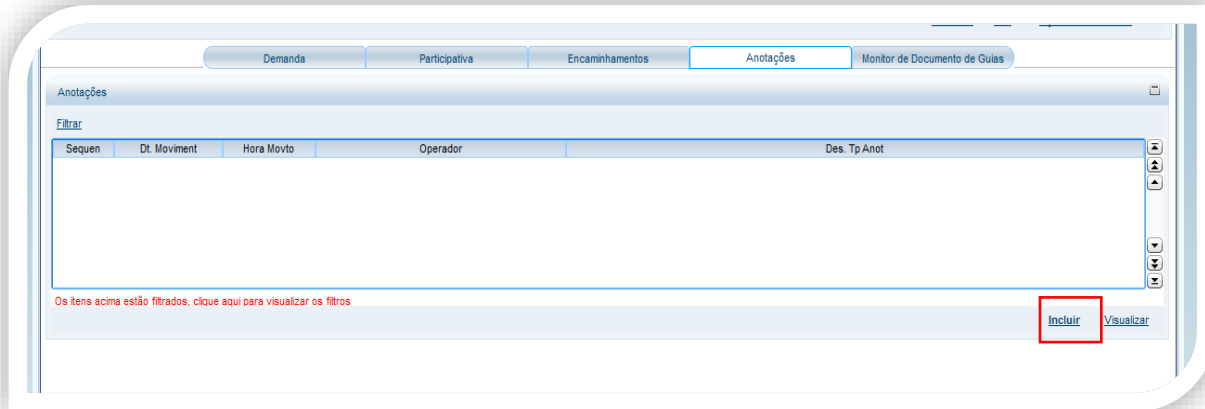

2. Insira as informações nos campos obrigatórios.

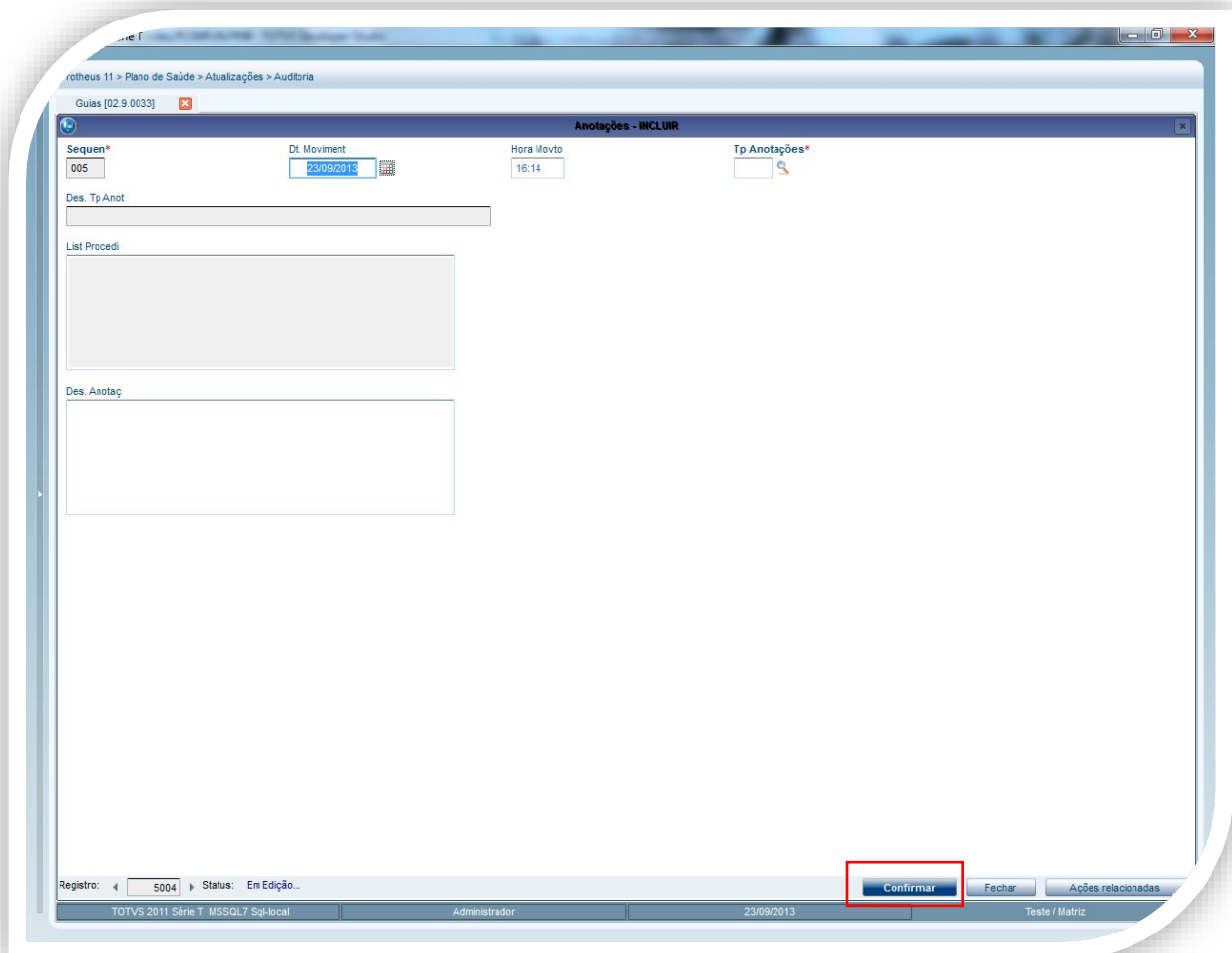

Dt. Moviment - Data do Movimento.

Hora Movto – Hora do movimento.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \*

Tp. Anotações - Tipo de Anotações Tabela BZ do SX5.


Des. Anotaç - Descrição da Anotação.

3. Clique em confirmar.


- **Monitor de documento de guias:** lista de documentos para adição ao banco de conhecimento da guia. Exemplo: banco de recebimento de documentos referentes ao atendimento ou solicitação de atendimento.

**Na pasta Monitor de documento de guias:**

1. De um duplo clique no documento que será incluído no banco de conhecimento.

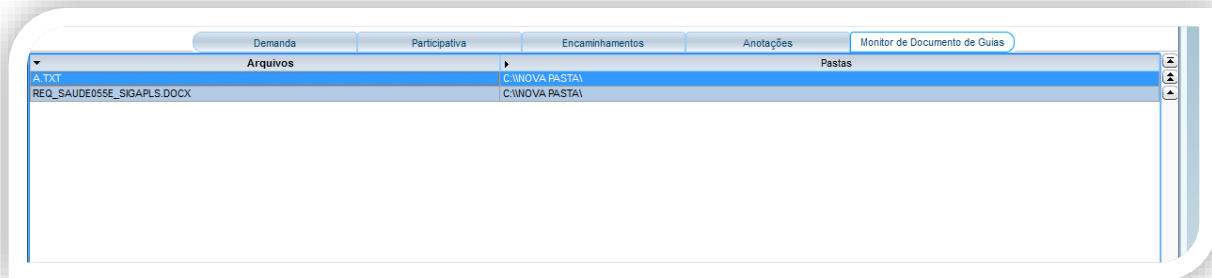


2. Clique em confirmar.

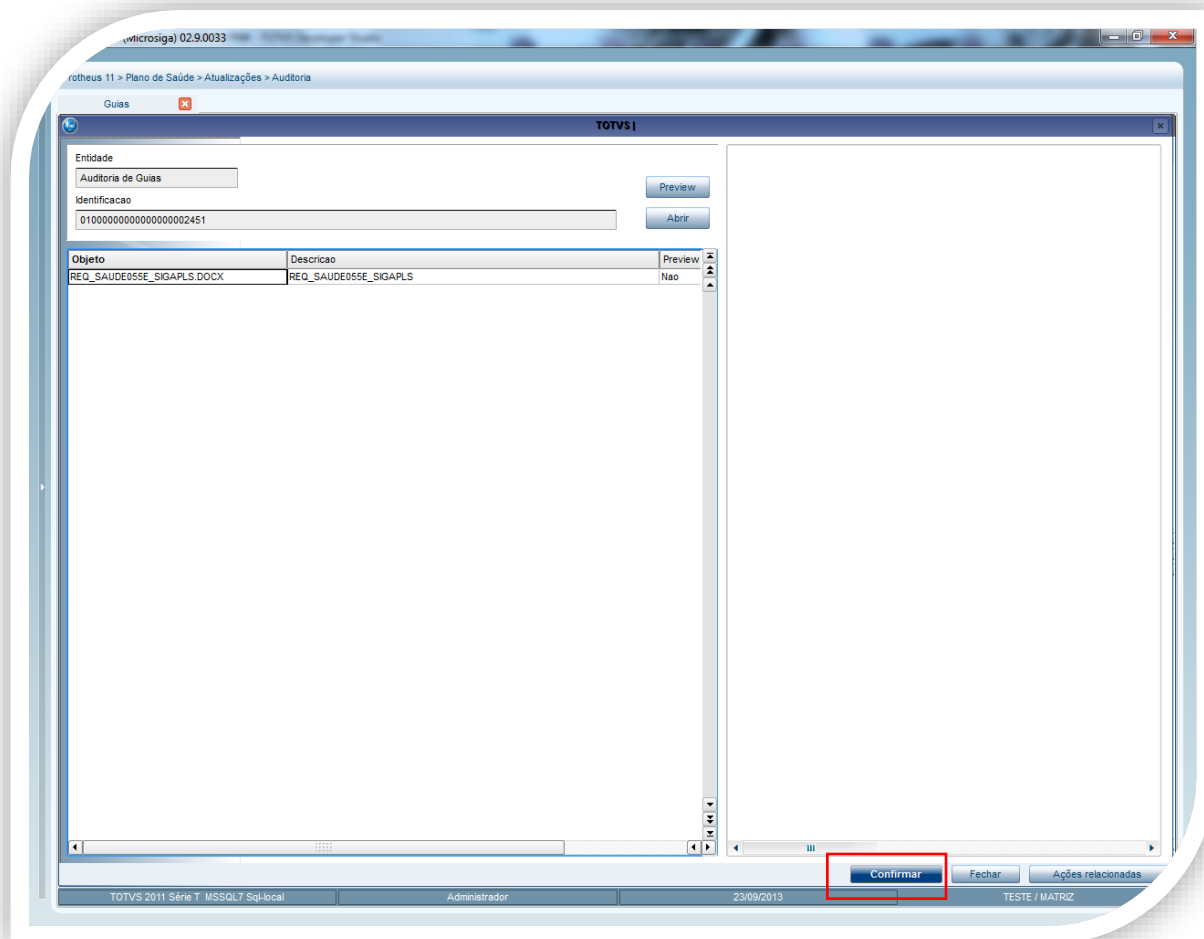

### ! Importante

É necessário configurar o diretório onde serão localizados os arquivos

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Operadora / Operador Sistema (PLSA980)**.
2. Selecione o Usuário que receberá a configuração para utilizar a auditoria e clique em alterar.
3. Altere o campo Monit. Doc. Para para a opção “Sim” e no campo Diret. Doc. insira o caminho do diretório onde estão localizados os arquivos.

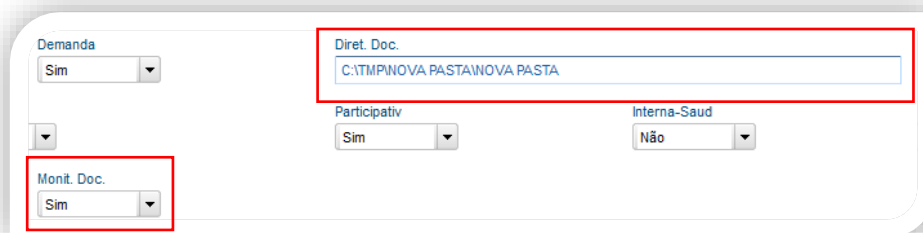

O tempo para carregar os documentos na tela podem variar de acordo com a quantidade de documentos na pasta configurada.

- **Interna-Saúde:** análise da auditoria interna. Exemplo: auditor interno (na maioria das vezes um médico) analisa as autorizações efetuadas pelos auditores (técnico, operacional ou administrativo). Com a opção de interna-saúde habilitada, não será possível reservar a guia.


#### Na pasta Interna-Saúde:

**Avaliação** – avaliar as inconsistências.

**Andamento** – Interação com auditor interna-Saúde.

**Visualizar** – Visualizar a inconsistência.

1. Selecione uma das autorizações e clique em avaliação.

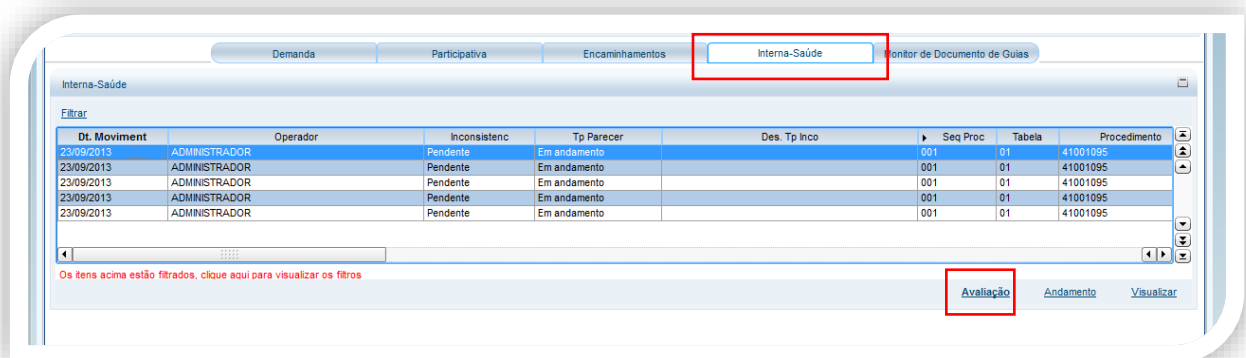

A Proxima tela consiste em dois tipos de informação, avaliação da interna Saúde e análise do auditor.



Microsoft Office Word 2010 (microsiga) 029.0033

rotheus 11 > Plano de Saúde > Atualizações > Auditoria

Guias - 99/01

### Interna Saúde - AVALIAÇÃO

Inconsistenc: Sim | Tp Parecer: Não concorda | Tp Inconsist: | Des. Tp Inco: |

Obs. Saúde: | Procedimento: 41001095

Desc. Proc.: ABDOME TOTAL (ABDOME SUPERIOR, PELVE E RETROPERITO) | Glosa: 001 | Desc. Glosa: PARA ESTE PROCEDIMENTO DEVERA SER EFETUADO O PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO N(

Vir Aut Tot: 0,00 | Via Acesso: | % Via: 0,00

---

### Análise do Auditor

Procedimento: 41001095 | Desc. Proc.: ABDOME TOTAL (ABDOME SUPERIOR, PELVE E RETROPERITO) | Glosa: 001

Desc. Glosa: PARA ESTE PROCEDIMENTO DEVERA SER EFETUADO O PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO N(

Parecer\*: Autorizado | Cons. todos: Sim

Motivo: 01 | Des. Motivo: MOTIVO PADRAO

Qtd. Autori: 5,00 | Vir. Aut Uni: 0,0000


Info. Proce: | Vir Aut Tot: 0,00 | Via Acesso: | % Via: 0,00

Registro: 184 | Status: Em Edição... | Confirmar | Fechar | Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T MSSQL7 Sql-local | MEDICO | 24/09/2013 | Teste / Matriz

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \*

## Interna Saúde

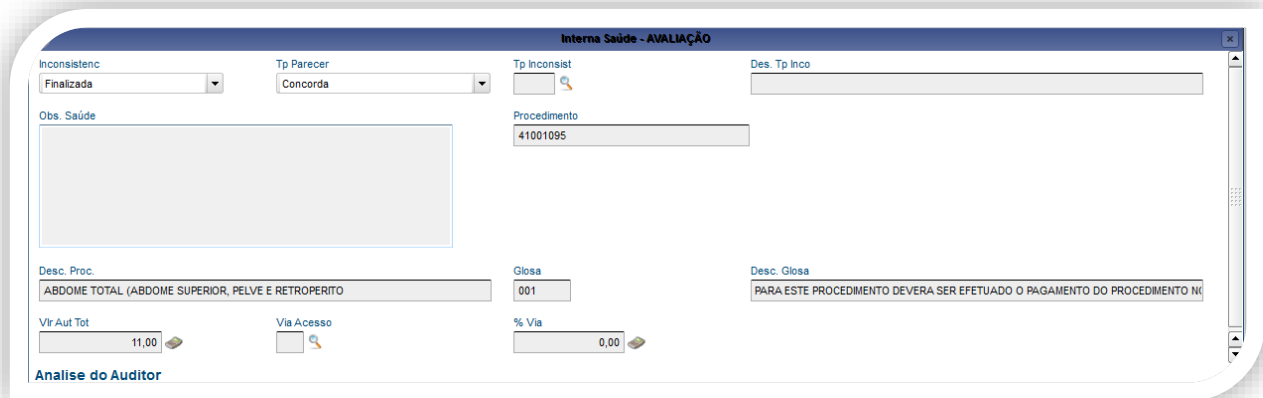


The screenshot shows the 'Interna Saúde - AVALIAÇÃO' form. The 'Inconsistenc' dropdown is set to 'Finalizada'. The 'Tp Parecer' dropdown is set to 'Concorda'. The 'Tp Inconsist' field is empty. The 'Obs. Saúde' field is empty. The 'Procedimento' field contains '41001095'. The 'Desc. Proc.' field contains 'ABDOME TOTAL (ABDOME SUPERIOR, PELVE E RETROPERITO)'. The 'Glosa' field contains '001'. The 'Desc. Glosa' field contains 'PARA ESTE PROCEDIMENTO DEVERA SER EFETUADO O PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO N'. The 'Vlr Aut Tot' field contains '11,00'. The 'Via Acesso' field is empty. The '% Via' field contains '0,00'. The 'Analisar do Auditor' button is visible at the bottom left.

Para a avaliação da interna saúde é necessário preencher os campos:

Inconsistenc – Inconsistencia

De acordo com a opção selecionada na inconsistência, o campo Tp Parecer é alterado e os campos Tp Inconsist e Obs. Saúde são habilitados para utilização.

Imagem 1

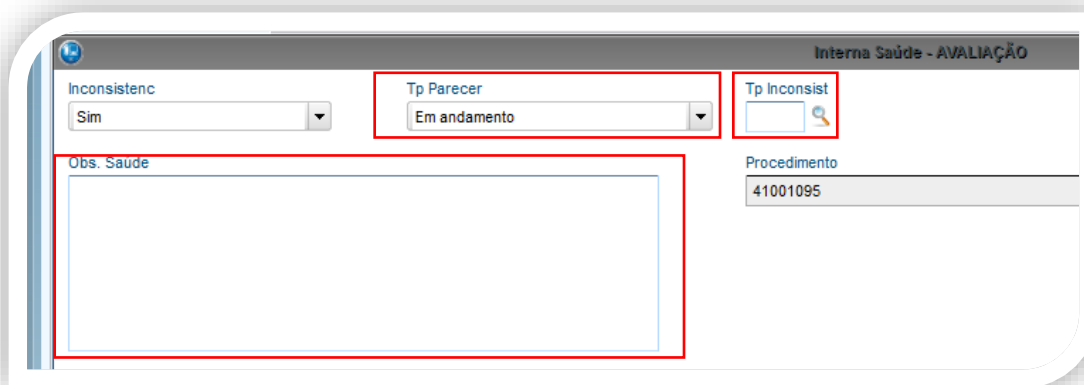


The screenshot shows the 'Interna Saúde - AVALIAÇÃO' form. The 'Inconsistenc' dropdown is set to 'Sim'. The 'Tp Parecer' dropdown is set to 'Em andamento'. The 'Tp Inconsist' field is empty. The 'Obs. Saúde' field is empty. The 'Procedimento' field contains '41001095'.

Imagem 2



The screenshot shows the 'Interna Saúde - AVALIAÇÃO' form. The 'Inconsistenc' dropdown is set to 'Pendente'. The 'Tp Parecer' dropdown is set to 'Em andamento'. The 'Tp Inconsist' field is empty. The 'Obs. Saúde' field is empty. The 'Procedimento' field contains '41001095'.

Imagem 3

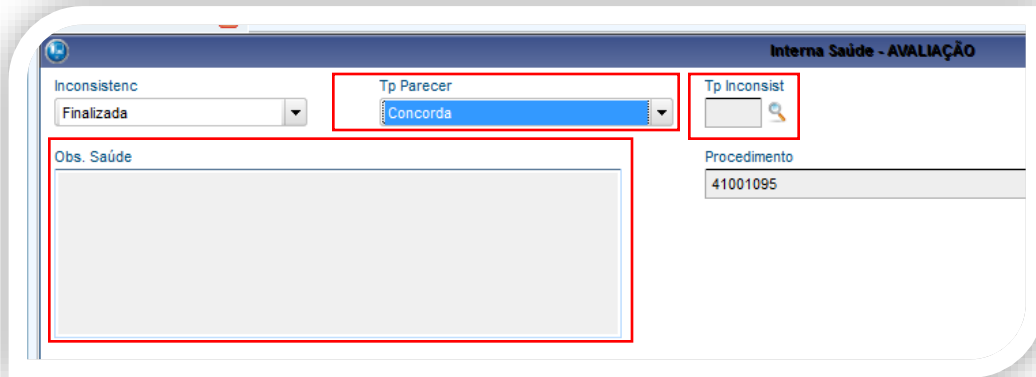


Tp Parecer - Tipo do Parecer do auditor Interna-Saúde.

Tp incosist - Tipo de Inconsistencia Tabela C7 do SX5.

Obs. Saúde - Observação auditor interna saúde.


#### Análise do Auditor

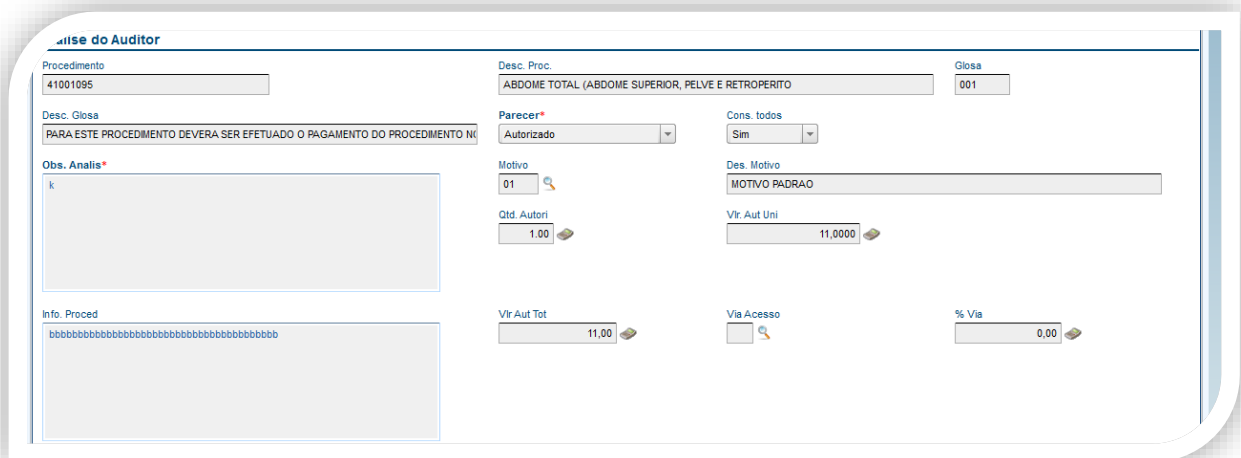


Contem as informações da análise feita pelo auditor.

2. Em **Ações Relacionadas**, de acordo com o perfil do operador do sistema, estão disponíveis as opções:
  - **Reservar/Liberar:** reserva a guia para o operador. É possível autorizar ou negar o procedimento.
  - **Enviar p/ Espera:** muda a situação **Analisada** da guia para **Em Espera**.
  - **Finaliza Análise Part:** muda a situação **Analisada** da guia para **Sim**.
  - **Alt Prioridade:** altera a prioridade da guia.
  - **Inconsistência:** analisar as inconsistências geradas pela Interna Saúde.
  - **Neg participação:** nega a participação (Unidade de Medida) do item **Procedimento**.

- **Trans. p/ Demanda:** transfere a guia para processo de demanda.
- **Banco de Conhecimento:** adicionar conhecimento (arquivo) a Guia.
- **Personalizar:** opções de filtro.
- **Relacionados:** opções existentes na Auditoria **Por Procedimento** (PLSA790); legado.

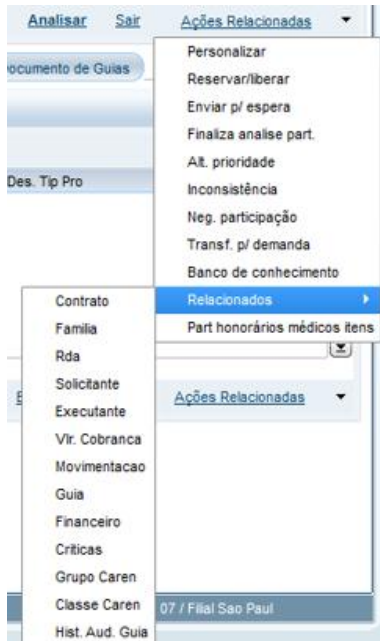

- **Part. Honorários Médicos Itens:** Opção utilizada para visualizar a composição dos eventos da guia.
  1. Clique na opção Part honorários médicos itens.
  2. Todos os eventos da guia serão visualizado na tela.

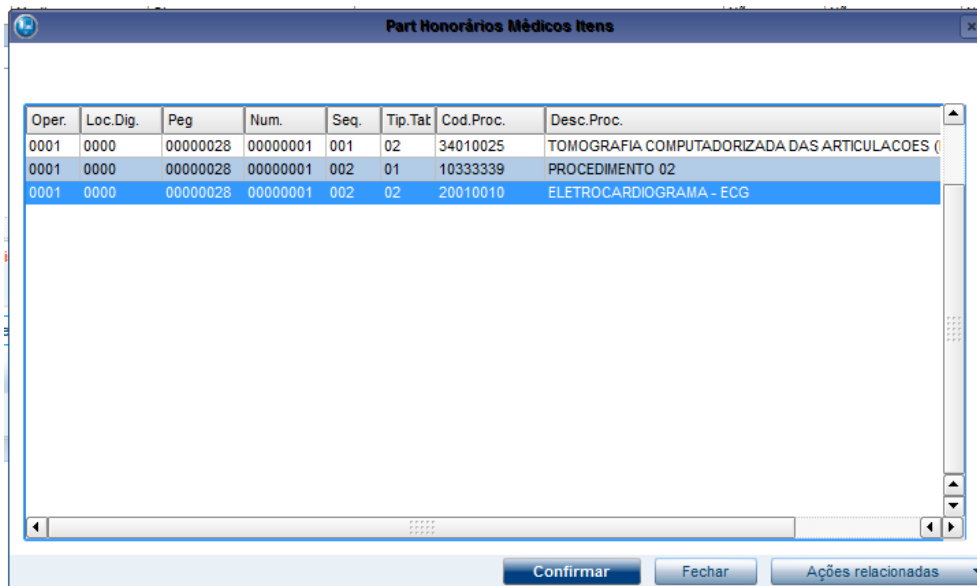

The screenshot shows a window titled 'Part Honorários Médicos Itens'. It contains a table with the following columns: Oper., Loc.Dig., Peg, Num., Seq., Tip.Tat, Cod.Proc., and Desc.Proc. The table lists three rows of data:

Oper.	Loc.Dig.	Peg	Num.	Seq.	Tip.Tat	Cod.Proc.	Desc.Proc.
0001	0000	00000028	00000001	001	02	34010025	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTICULACOES (
0001	0000	00000028	00000001	002	01	10333339	PROCEDIMENTO 02
0001	0000	00000028	00000001	002	02	20010010	ELETROCARDIOGRAMA - ECG

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Confirmar', 'Fechar', and 'Ações relacionadas'.

3. Dê duplo clique em cima do evento que deseja visualizar a composição.  
As informações do evento será visualizada.

**Dados do Procedimento e Itens**


Cd.Tp.Tabela\*  Cd.Proc.\*

Desc. Proc.\*  Qtd Solicit  Qtd Realizad

Qtd Apresen.  Vir Apr Uni  Data Vic


Unidade	Cód.RDA.Pag.	Nome RDA Pag	Cd.Tp.Tabela	Cod. Proc.
HM	000004	HOSPITAL DO PLANO DE SAUDE - 000004	02	20010010

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \*

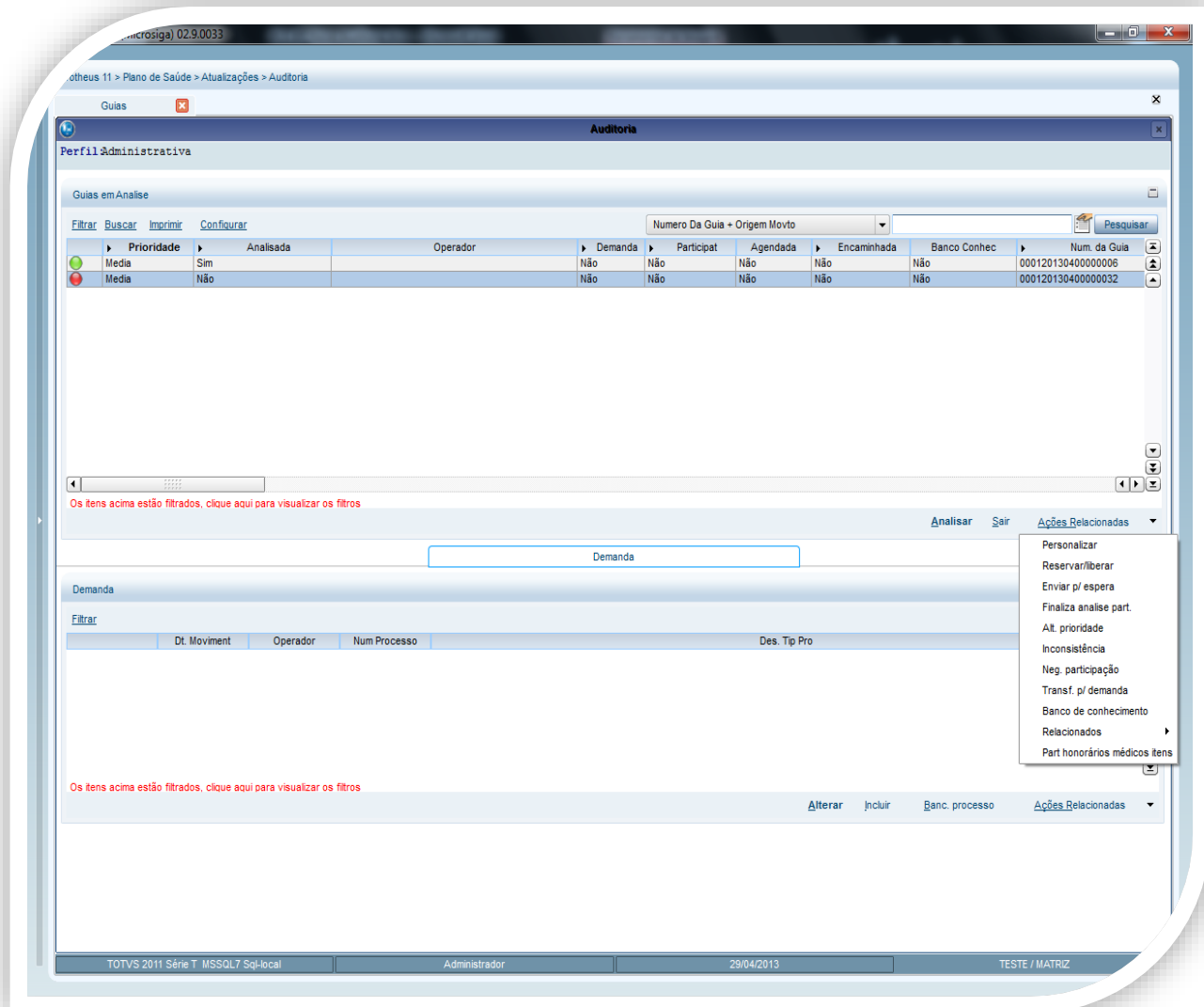


### Auditando uma Guia

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Auditoria / Por Guia (PLSA790V)**.
2. Selecione a guia a ser auditada
3. Clique em ações relacionadas/ (Reservar/Liberar)

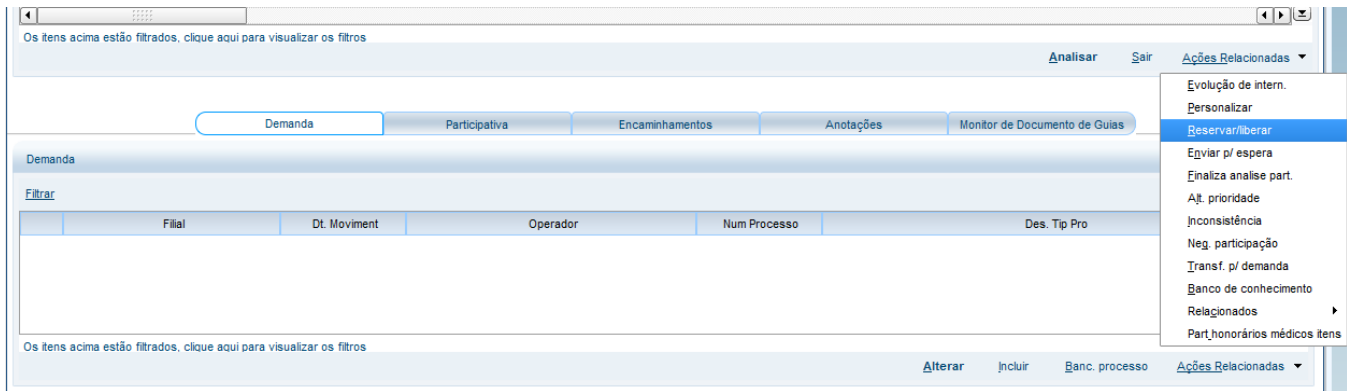


O campo **analisada** ficará com o status Em análise.

4. Clique em analisar

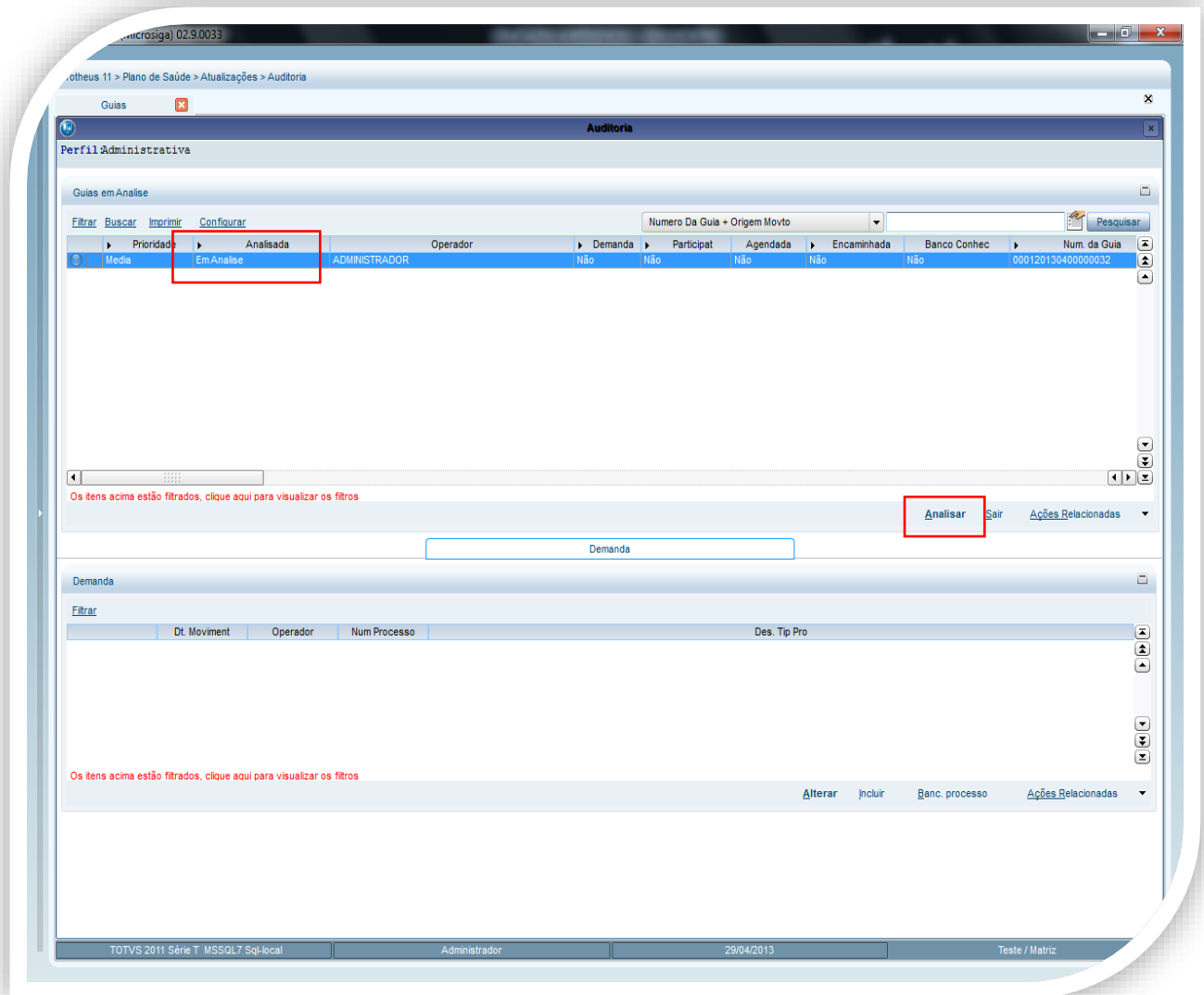


Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \*

5. Selecione o procedimento que será auditado e cliquem em parecer.

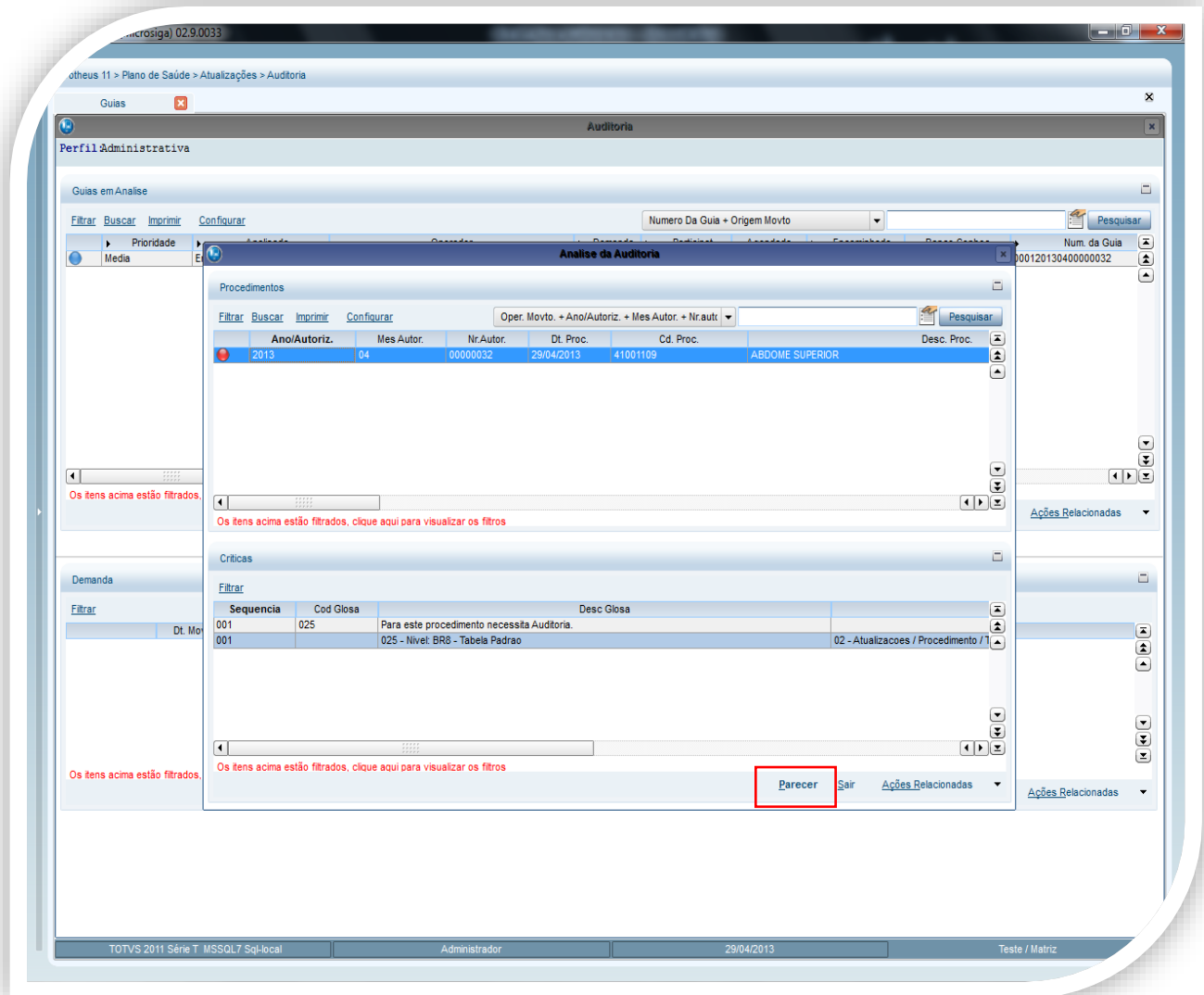


6. No campo parecer, escolha uma das opções disponível ( Autorizado, negado ou em análise).
7. Preencha os campos restantes e clique em confirmar.



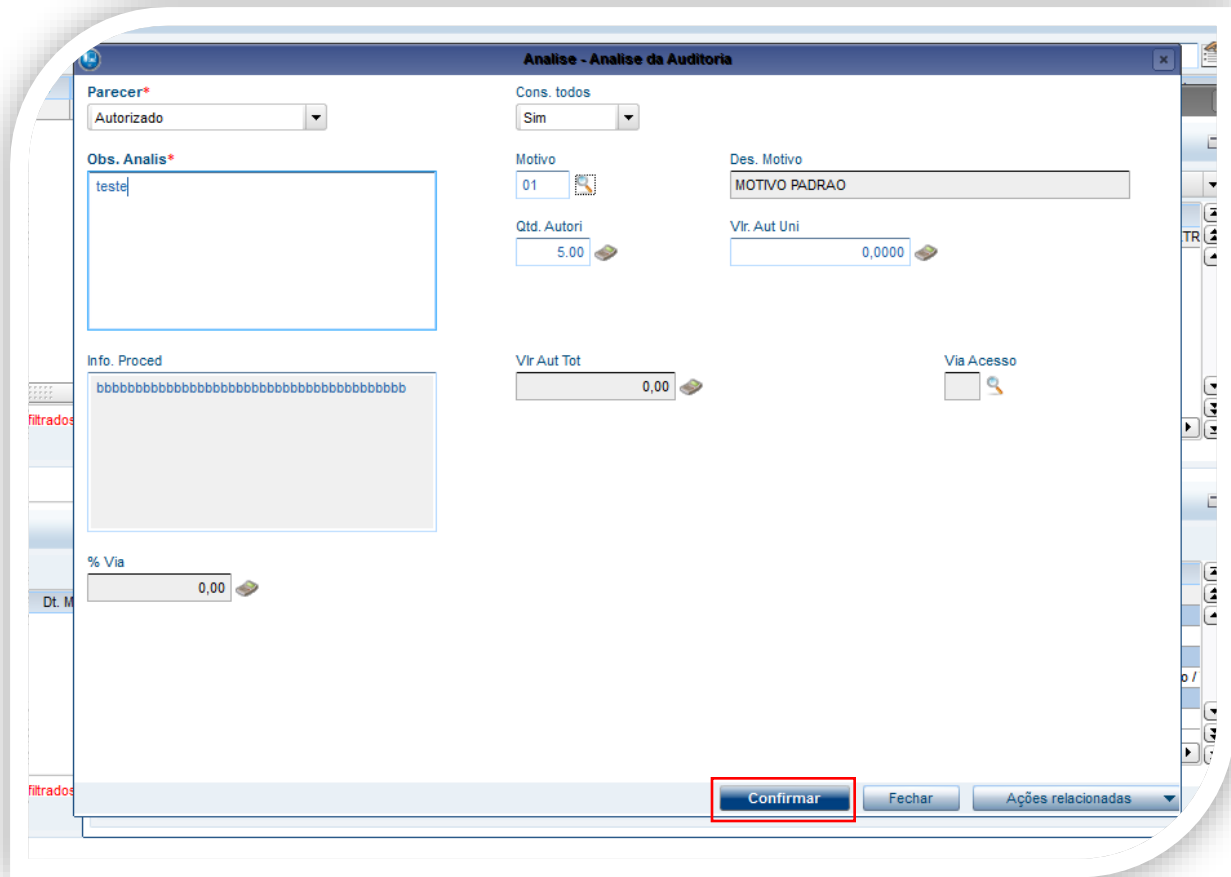


O status do procedimento será alterado de acordo com a escolha do parecer.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \*

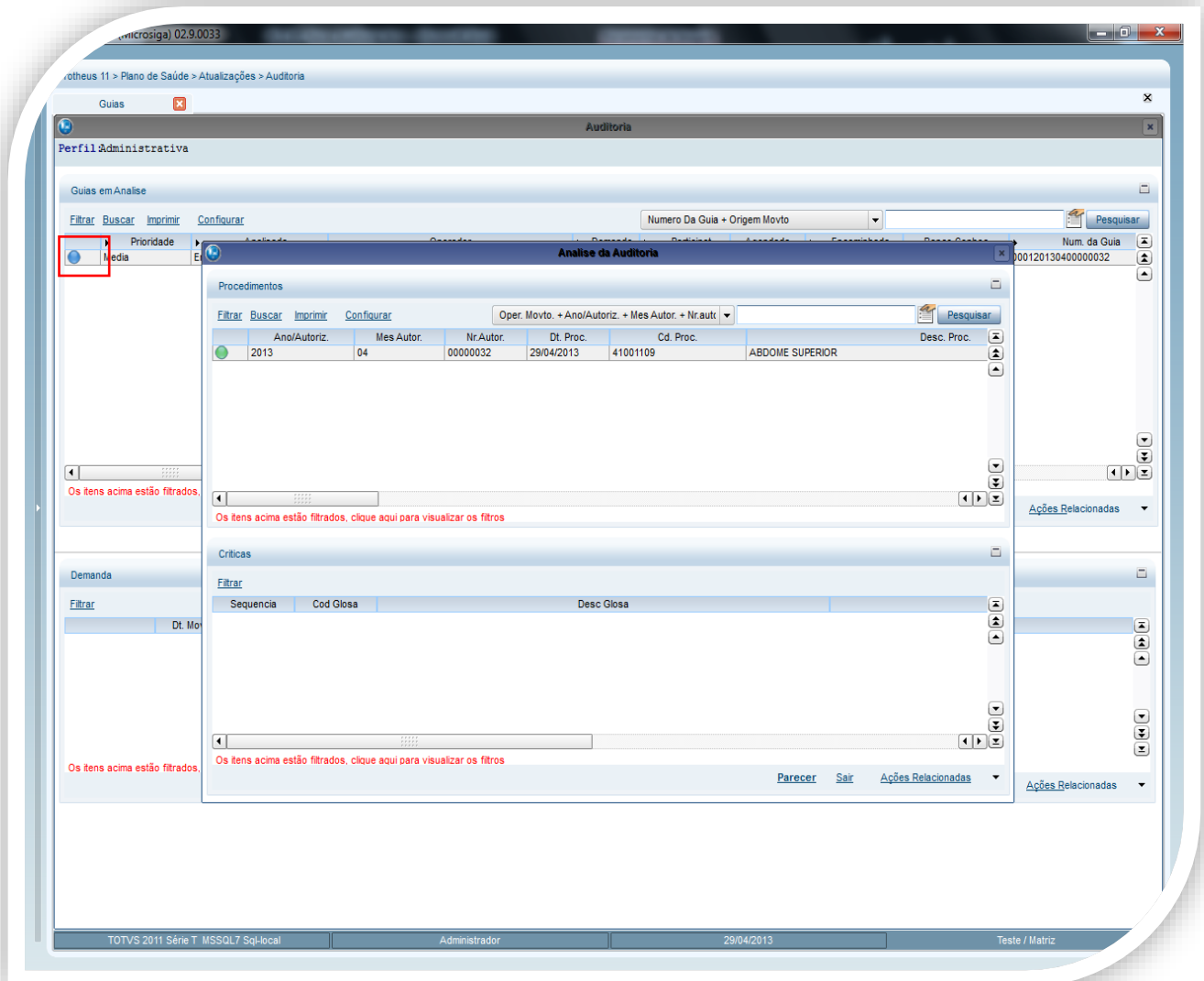


8. Clique em sair.

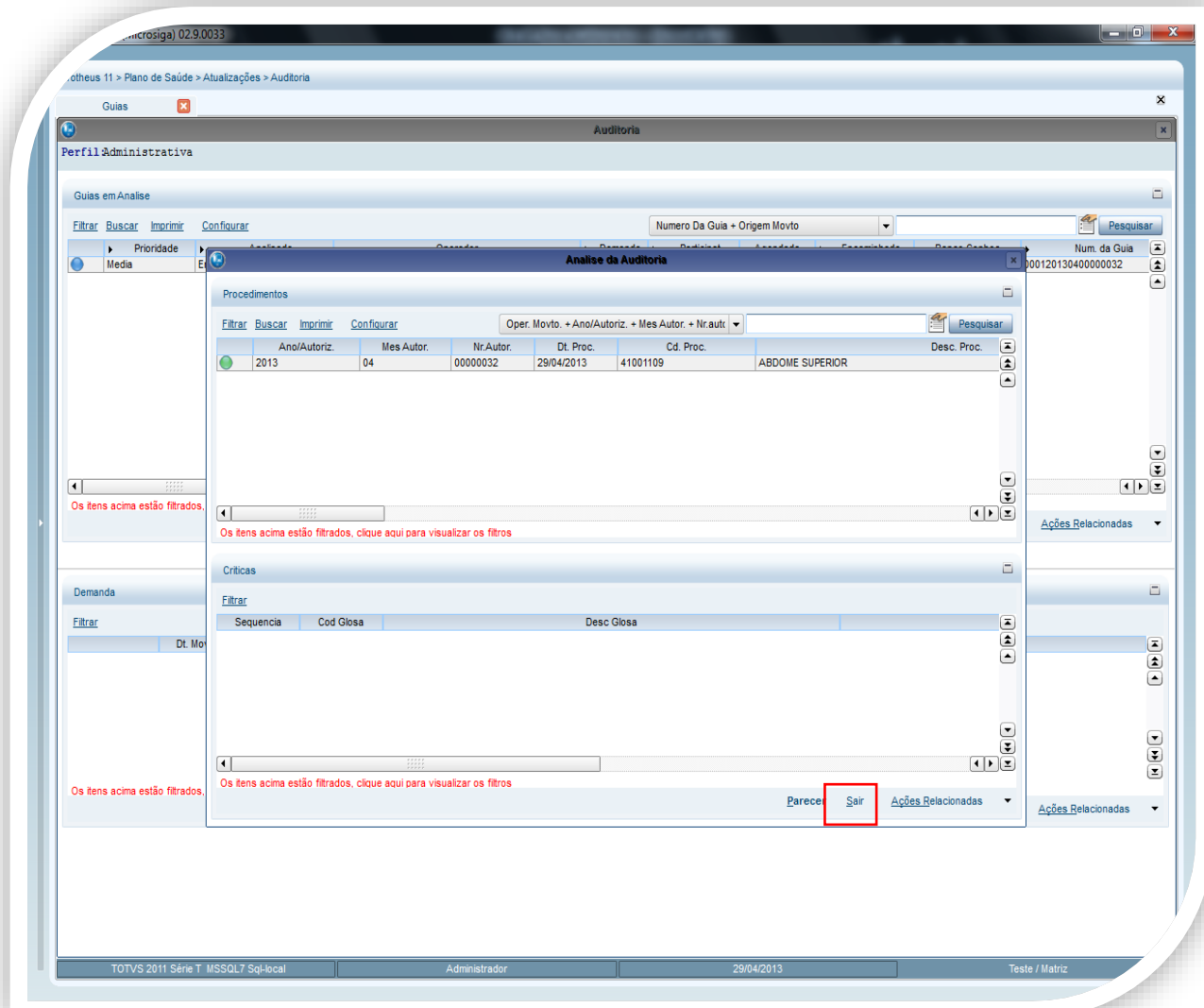

O status da guia será alterada.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \*

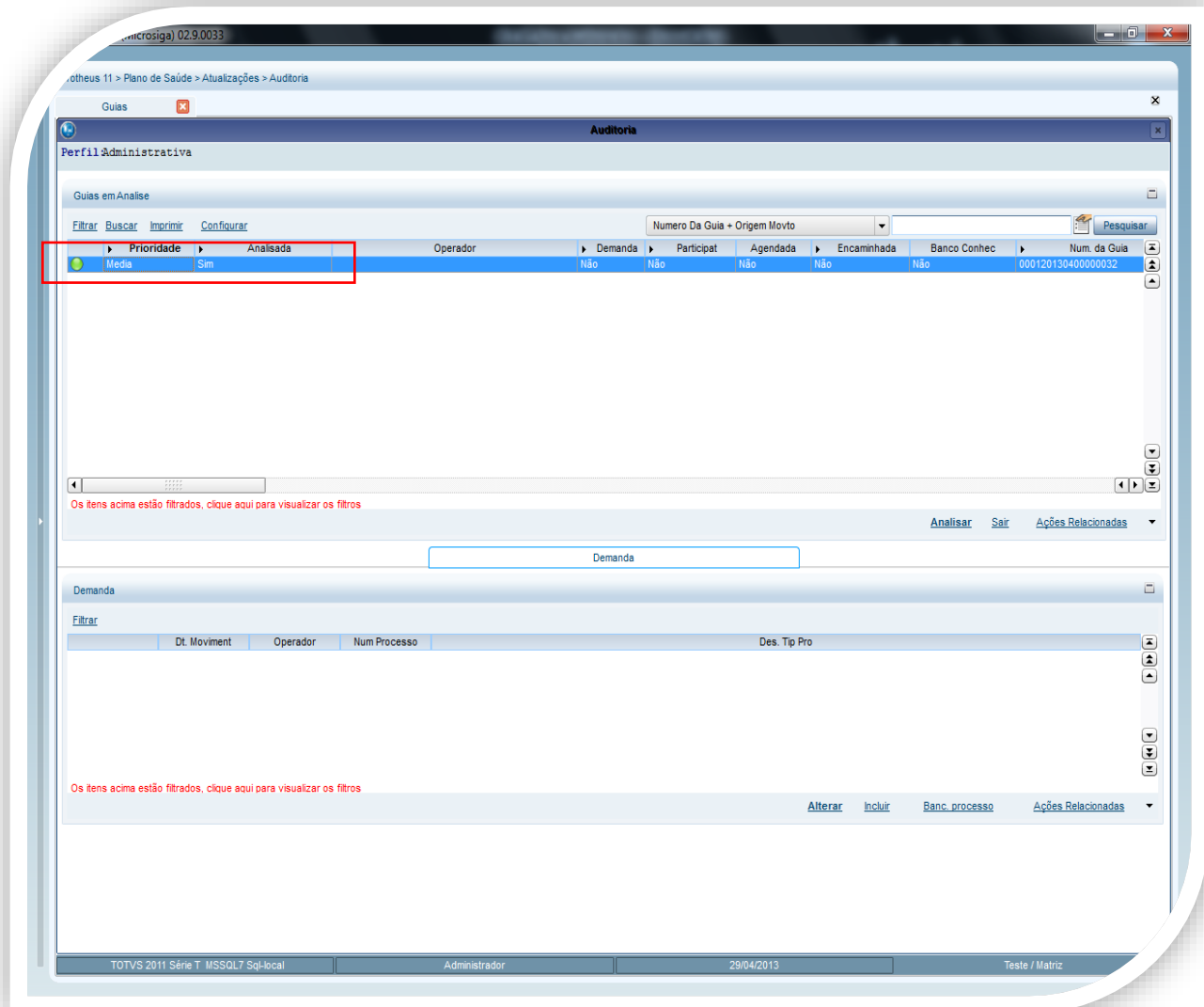

### ! Importante

- O campo analisado somente será alterado para SIM, quando todos os procedimentos da guia forem auditados.
- Enquanto a guia estiver em análise pelo auditor, não será possível excluir a guia.


### Auditando Guias de Evolução de internação

No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Auditoria / Por Guia (PLSA790V)**.

2. Selecione a guia a ser auditada
3. Clique em **Acções Relacionadas/ Evolução de intern.**
4. Repita o processo de auditoria dos procedimentos.

### Digitação Contas

1. No módulo **Plano de Saúde** acesse **Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498)**.
2. Selecione uma peg e uma guia.
3. Clique em **Ações Relacionadas** e acesse o sub-menu **Reg. Auditoria** para visualizar o registro referente a análise do auditor.

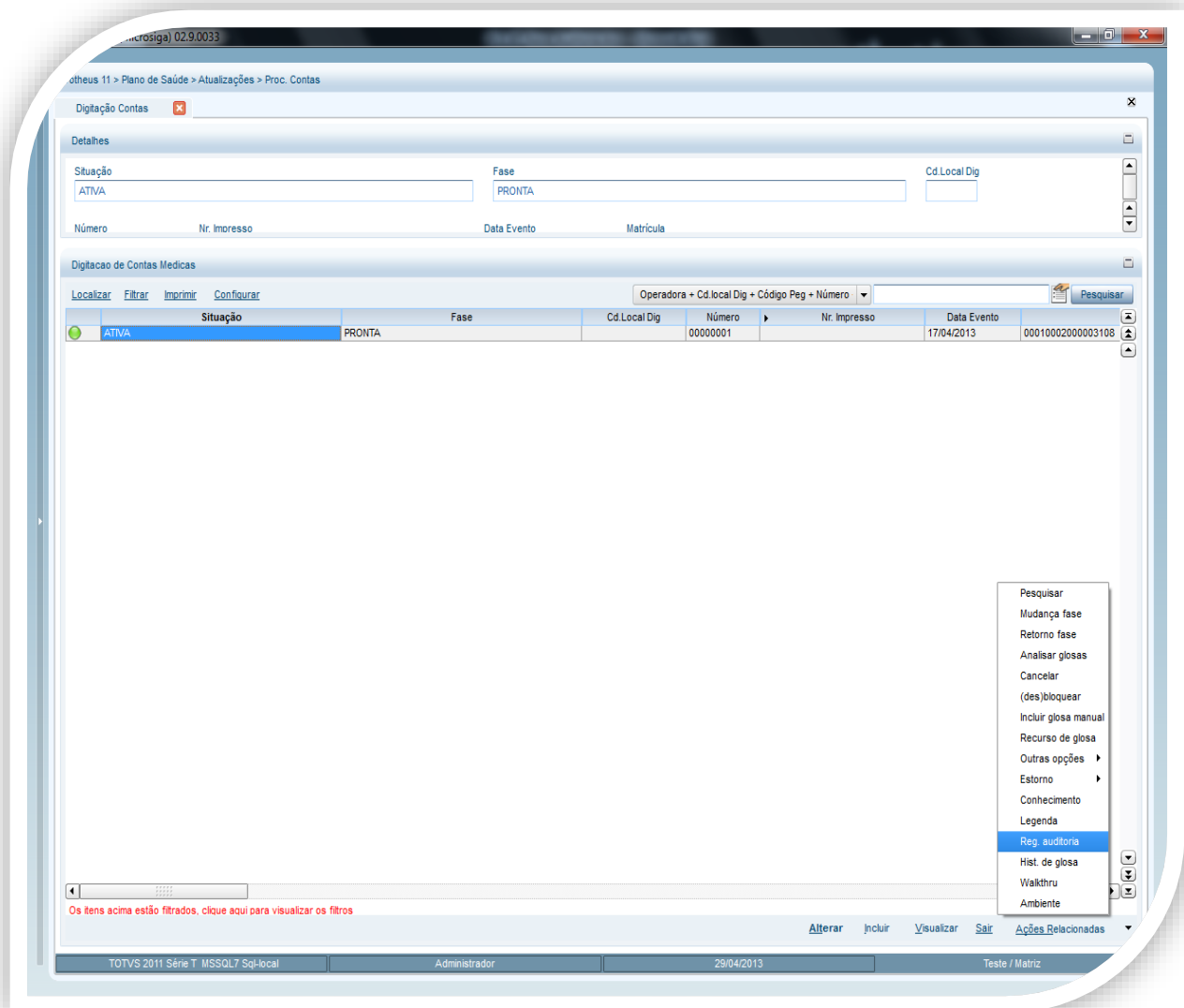

### Atualizações do compatibilizador

## 1. Criação no arquivo SX2 – Tabela.

- Tabela B44 - Cabeçalho Reembolso

<b>Tabela</b>	B44
<b>Único</b>	B44_FILIAL + B44_OPEMOV+ B44_ANOAUT + B44_MESAUT + B44_NUMAUT

- Tabela B45 - Itens do reembolso

<b>Tabela</b>	B45
<b>Único</b>	B45_FILIAL + B45_OPEMOV+ B45_ANOAUT + B45_MESAUT + B45_NUMAUT + B45_SEQUEN

- Tabela B46 - Criticas do reembolso

<b>Tabela</b>	B46
<b>Único</b>	B46_FILIAL + B46_OPEMOV+ B46_ANOAUT + B46_MESAUT + B46_NUMAUT + B46_SEQUEN + B46_CODGLO + B46_DESGLO

- Tabela BE2 - Autorização e Procedimentos

<b>Tabela</b>	BE2
<b>Único</b>	BE2_FILIAL + BE2_OPEMOV + BE2_ANOAUT + BE2_MESAUT + BE2_NUMAUT + BE2_SEQUEN

- Tabela BEG - Autorizações Eventos Críticos

<b>Tabela</b>	BEG
<b>Único</b>	BEG_FILIAL + BEG_OPEMOV + BEG_ANOAUT + BEG_MESAUT + BEG_NUMAUT + BEG_SEQUEN + BEG_CODGLO + BEG_DESGLO

- Tabela BEJ- Itens Autorização Internação

<b>Tabela</b>	BEJ
<b>Único</b>	BEJ_FILIAL + BEJ_CODOPE + BEJ_ANOINT + BEJ_MESINT + BEJ_NUMINT + BEJ_SEQUEN

- Tabela BE4 - Internações

<b>Tabela</b>	BE4
<b>Único</b>	BE4_FILIAL, BE4_CODOPE, BE4_CODLDP, BE4_CODPEG, BE4_NUMERO, BE4_SITUAC, BE4_FASE

- Tabela BEL - Criticas da Autorização

<b>Tabela</b>	BEL
---------------	-----

<b>Único</b>	BEL_FILIAL + BEL_CODOPE + BEL_ANOINT + BEL_MESINT + BEL_NUMINT + BEL_SEQUEN + BEL_CODGLO + BEL_DESGLO
--------------	---

- Tabela BQV - Evolução das Diárias

<b>Tabela</b>	BQV
<b>Único</b>	BQV_FILIAL + BQV_CODOPE + BQV_ANOINT + BQV_MESINT + BQV_NUMINT + BQV_SEQUEN

- Tabela BQZ - Criticas da Evolução de Diária

<b>Tabela</b>	BQZ
<b>Único</b>	BQZ_FILIAL + BQZ_CODOPE + BQZ_ANOINT + BQZ_MESINT + BQZ_NUMINT + BQZ_SEQUEN + BQZ_CODGLO + BQZ_DESGLO

- Tabela B53 - Auditoria de Guias

<b>Tabela</b>	B53
<b>Nome</b>	Auditoria de Guias
<b>Modo</b>	C
<b>Único</b>	B53_FILIAL + B53_CODOPE + B53_CODLDP + B53_CODPEG + B53_NUMERO + B53_ORIMOV

- Tabela B68 - Demanda

<b>Tabela</b>	B68
<b>Nome</b>	Demanda
<b>Modo</b>	C
<b>Único</b>	B68_FILIAL + B68_ALIMOV + B68_RECMOV + B68_NUMPRC + B68_TPPROC

- Tabela B69 - Anotações

<b>Tabela</b>	B69
<b>Nome</b>	Anotações
<b>Modo</b>	C
<b>Único</b>	B69_FILIAL + B69_ALIMOV + B69_RECMOV + B69_SEQUEN

- Tabela B70 - Participativa

<b>Tabela</b>	B70
<b>Nome</b>	Participativa
<b>Modo</b>	C

<b>Único</b>	B70_FILIAL + B70_ALIMOV + B70_RECMOV + B70_SEQUEN
--------------	---

- Tabela B71 - Encaminhamento

<b>Tabela</b>	B71
<b>Nome</b>	Encaminhamento
<b>Modo</b>	C
<b>Único</b>	B71_FILIAL + B71_ALIMOV + B71_RECMOV + B71_SEQUEN

- Tabela B72 - Interna Saúde

<b>Tabela</b>	B72
<b>Nome</b>	Interna Saúde
<b>Modo</b>	C
<b>Único</b>	B72_FILIAL + B72_ALIMOV + B72_RECMOV + B72_SEQPRO + B72_CODPAD + B72_CODPRO + B72_CODGLO

- Tabela B73 - Interna Saúde Complemento

<b>Tabela</b>	B73
<b>Nome</b>	Interna Saúde Complemento
<b>Modo</b>	C
<b>Único</b>	B73_FILIAL + B73_ALIMOV + B73_RECMOV + B73_SEQPRO + B73_CODGLO + B73_SEQUEN

- Tabela BX3 - Log de Utilização de Rotina

<b>Tabela</b>	BX3
<b>Nome</b>	Log de Utilização de Rotina
<b>Modo</b>	C
<b>Único</b>	BX3_FILIAL + BX3_OPERAD + BX3_TIPO + BX3_ALIAS

## 2. Criação ou Alteração no arquivo SX3 – Campos.

- Tabela BEA – Complemento Movimentações

<b>Campo</b>	BEA_ORIMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!



<b>Título</b>	Origem Movto
<b>Descrição</b>	Origem do Movimento
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Guias de Consultas/Serviços; 2=Guia de Internação; 3=Outros
<b>Validação</b>	""

- Tabela BE2 – Autorizacao e Procedimentos

<b>Campo</b>	BE2_PARTIC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Partic.
<b>Descrição</b>	Participativa
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Nao;1=Sim
<b>Validação</b>	

- Tabela BE4 – Internacoes

<b>Campo</b>	BE4_PARTIC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Partic.
<b>Descrição</b>	Participativa
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Nao;1=Sim
<b>Validação</b>	

- Tabela B45 – Itens do reembolso

<b>Campo</b>	B45_DESPRO
<b>Inic. Browse</b>	Posicione("BR8", 1, xFilial("BR8") + B45->B45_CODPAD + B45->B45_CODPRO, "BR8_DESCRI")

<b>Campo</b>	B45_VALAPT
<b>Tipo</b>	Numerico
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 9,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr Apr Tot
<b>Descrição</b>	Vlr Apr Tot
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B45_VLRAPR
<b>Título</b>	Vlr Apr Uni
<b>Descrição</b>	Vlr Apr Uni
<b>Obrigatório</b>	Sim

<b>Campo</b>	B45_PARTIC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Partic.
<b>Descrição</b>	Participativa
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Nao;1=Sim
<b>Validação</b>	

- Tabela B46 – Criticas do reembolso

<b>Campo</b>	B46_OPERAD
--------------	------------

<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Operad
<b>Descrição</b>	Cod Ope Analise
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B46_PENDEN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Pendente
<b>Descrição</b>	Pendente
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

<b>Campo</b>	B46_OPEMOV
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	B46_ANOAUT
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	B46_MESAUT
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	B46_NUMAUT
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	B46_SEQUEN
<b>Browse</b>	Sim

<b>Campo</b>	B46_CODGLO
--------------	------------

<b>Browse</b>	Sim
<b>Campo</b>	B46_DESGLO
<b>Browse</b>	Sim
<b>Campo</b>	B46_INFGLO
<b>Browse</b>	Sim

- Tabela B53 – Auditoria de Guias

<b>Campo</b>	B53_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_CODOPE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operadora
<b>Descrição</b>	Código da Operadora
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_CODLDP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Local Dig

<b>Descrição</b>	Local de Digitação
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_CODPEG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Peg
<b>Descrição</b>	Código da Peg
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_NUMERO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Número Guia
<b>Descrição</b>	Número da guia
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_ALIMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alias Relac
<b>Descrição</b>	Alias de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_RECMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Recno Relac
<b>Descrição</b>	Recno de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_PERAUD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Perfil Audit
<b>Descrição</b>	Perfil do Auditor
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_STATUS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Guia
<b>Descrição</b>	Guia
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Autorizada; 2=Aut. Parcial; 3=Nao Autorizada; 4=Finalização Atendimento; 5=Liq. Titulo a Receber

<b>Campo</b>	B53_PRIORI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Prioridade
<b>Descrição</b>	Prioridade
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	2=Baixa;1=Media;0=Alta

<b>Campo</b>	B53_SITUAC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Analisada
<b>Descrição</b>	Analisada
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim; 2=Em Analise; 3=Em Espera; 4=Inconsistência

<b>Campo</b>	B53_OPERAD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador
<b>Descrição</b>	Código do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_NOMOPE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

<b>Título</b>	Operador
<b>Descrição</b>	Nome do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_DEMAND
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Demanda
<b>Descrição</b>	Auditoria Demanda
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

<b>Campo</b>	B53_PARTIC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Participat
<b>Descrição</b>	Auditoria Participativa
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

<b>Campo</b>	B53_AGEPAR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Agendada
<b>Descrição</b>	Agendada
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim



<b>Campo</b>	B53_ENCAMI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Encaminhada
<b>Descrição</b>	Guia Encaminhada
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

<b>Campo</b>	B53_BANCON
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Banco Conhec
<b>Descrição</b>	Banco de Conhecimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

<b>Campo</b>	B53_NUMGUI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num. da Guia
<b>Descrição</b>	Número da Guia
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Campo</b>	B53_TIPO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Atendimento

<b>Descrição</b>	Atendimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Consulta; 2=SADT; 3=Internação; 4=Odontológico; 5=Reembolso

<b>Campo</b>	B53_ORIMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Origem Movto
<b>Descrição</b>	Origem do Movimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Guias de Consultas/Serviços; 2=Guia de Internação; 3=Outros

<b>Campo</b>	B53_PROINT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Prorrogação
<b>Descrição</b>	Prorrogação de Internação
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

<b>Campo</b>	B53_DATMOV
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt. Moviment
<b>Descrição</b>	Data da Movimen
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_HORMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99:99
<b>Título</b>	Hr. Moviment
<b>Descrição</b>	Hora da Movimen
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_DATINI
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt Ini Anali
<b>Descrição</b>	Data Ini Analise
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_HORINI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99:99
<b>Título</b>	Ho Ini Anali
<b>Descrição</b>	Hora Ini Analise
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_DATFIM
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt Ini Fim
<b>Descrição</b>	Data Fim Analise
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_HORFIM
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99:99
<b>Título</b>	Ho Fim Anali
<b>Descrição</b>	Hora Fim Analise
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_MATUSU
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Matric. Usu.
<b>Descrição</b>	Matricula Usuário
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_NOMUSR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	70
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Usuário

<b>Descrição</b>	Nome do Usuário
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_CODRDA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Código Rda
<b>Descrição</b>	Código da Rda
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_NOMRDA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	25
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Rda
<b>Descrição</b>	Nome da Rda
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_OPEENC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Ope. En
<b>Descrição</b>	Cod. Ope. Encaminhamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_NOOPEN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Resp. Encam.
<b>Descrição</b>	Nome Ope do Encaminham.
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_CODDEP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Depto
<b>Descrição</b>	Código do Depto
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_DESDEP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Depto
<b>Descrição</b>	Descrição do Depto
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B53_CARINT
--------------	------------

<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Caráter Int
<b>Descrição</b>	Caráter Internação
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	E=Eletiva; U=Urgência/Emergência

<b>Campo</b>	B53_REGINT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Regime Inter
<b>Descrição</b>	Regime Inter
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não se Aplica; 1=Hospitalar; 2=Hospital-Dia; 3=Domiciliar

- Tabela B68 - Demanda

<b>Campo</b>	B68_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B68_ALIMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alias Relac
<b>Descrição</b>	Alias de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B68_RECMOV
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Recno Relac
<b>Descrição</b>	Recno de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B68_DATMOV
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt. Moviment
<b>Descrição</b>	Data da Movimen
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B68_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Operador



<b>Descrição</b>	Código do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B68_TPPROC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Processo
<b>Descrição</b>	Tipo de Processo
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""
<b>Valid</b>	PlsSeek("SX5",1,"BV"+M->B68_TPPROC,"B68_DESTPP","X5_DESCR!")
<b>F3</b>	BV

<b>Campo</b>	B68_NOMOPE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador
<b>Descrição</b>	Nome do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B68_NUMPRC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num Processo
<b>Descrição</b>	Número do Processo

<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B68_DESTPP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Tip Pro
<b>Descrição</b>	Desc. Tipo de Proce
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B68_PERPRC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Edita Proces
<b>Descrição</b>	Permite editar Processo
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

- Tabela B69 - Anotações

<b>Campo</b>	B69_FILIAL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Opções</b>	""
---------------	----

<b>Campo</b>	B69_ALIMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alias Relac
<b>Descrição</b>	Alias de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_RECMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Recno Relac
<b>Descrição</b>	Recno de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_SEQUEN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Sequen
<b>Descrição</b>	Sequencial
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_DATMOV
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt. Moviment
<b>Descrição</b>	Data da Movimen
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_HORMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99:99
<b>Título</b>	Hora Movto
<b>Descrição</b>	Hora do Movimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Operador
<b>Descrição</b>	Código do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_NOMOPE
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador
<b>Descrição</b>	Nome do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_TPNOTA
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Anotações
<b>Descrição</b>	Tipo de Anotações
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_DESCRI
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Tp Anot
<b>Descrição</b>	Descrição Tipo de Anotação
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B69_LISPRO
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	500
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	List Procedi
<b>Descrição</b>	Lista de Procedimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

- Tabela B70 - Participativa

<b>Campo</b>	B70_FILIAL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_ALIMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alias Relac
<b>Descrição</b>	Alias de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_RECMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Recno Relac
<b>Descrição</b>	Recno de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_SEQUEN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Sequen
<b>Descrição</b>	Sequencial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_DATMOV
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt. Moviment
<b>Descrição</b>	Data da Movimen
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Operador
<b>Descrição</b>	Código do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_NOMOPE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador
<b>Descrição</b>	Nome do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_RELCOT
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Rel. Contato
<b>Descrição</b>	Realização de Contato
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""



<b>Campo</b>	B70_DATREA
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt Realiza
<b>Descrição</b>	Data de Realização
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_HORREA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99:99
<b>Título</b>	Hora Realiza
<b>Descrição</b>	Hora da Realização
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_CODDEP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Depto
<b>Descrição</b>	Código do Depto
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_DESDEP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Depto
<b>Descrição</b>	Descrição do Depto
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_CODCAR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Cargo
<b>Descrição</b>	Código do Cargo
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_DESCAR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Cargo
<b>Descrição</b>	Descrição do Cargo
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_COPAGE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Ope. Age
<b>Descrição</b>	Cod Operador Agendado
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_NOPAGE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador Age
<b>Descrição</b>	Nome Operador Age
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_DATAGE
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt Agendame
<b>Descrição</b>	Data Agendamento
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_HORAGE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	99:99
<b>Título</b>	Hora Agendam
<b>Descrição</b>	Hora do Agendamento
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_RELCON
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Real Confir
<b>Descrição</b>	Realização Confirmada
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B70_RELCON
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Real Confir
<b>Descrição</b>	Realização Confirmada
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

- Tabela B71 - Encaminhamento

<b>Campo</b>	B71_FILIAL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_ALIMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alias Relac
<b>Descrição</b>	Alias de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_RECMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Recno Relac
<b>Descrição</b>	Recno de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_SEQUEN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Sequen
<b>Descrição</b>	Sequencial
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_DATMOV
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt. Moviment
<b>Descrição</b>	Data da Movimen
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Operador
<b>Descrição</b>	Código do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_NOMOPE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador
<b>Descrição</b>	Nome do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_SEG MEN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Segmento
<b>Descrição</b>	Segmento
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_DESSEG
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Segment
<b>Descrição</b>	Descrição do Segmento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_CODDEP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Depto
<b>Descrição</b>	Código do Depto
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_DESDEP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Depto
<b>Descrição</b>	Descrição do Depto
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B71_LISPRO
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	500
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	List Procedi
<b>Descrição</b>	Lista de Procedimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""



<b>Campo</b>	B71_OBS
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Observação
<b>Descrição</b>	Observação
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

- Tabela B72 - Interna Saúde

<b>Campo</b>	B72_FILIAL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_ALIMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alias Relac
<b>Descrição</b>	Alias de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_RECMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Recno Relac
<b>Descrição</b>	Recno de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_DATMOV
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt. Moviment
<b>Descrição</b>	Data da Movimen
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador An.
<b>Descrição</b>	Cod do Operador da Analis
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_NOMOPE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador
<b>Descrição</b>	Nome do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_INCONS
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Inconsistenc
<b>Descrição</b>	Inconsistência
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim; 2=Pendente; 3=Finalizada

<b>Campo</b>	B72_TPPARE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Parecer
<b>Descrição</b>	Tipo de Parecer
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Em andamento; 1=Concorda; 2=Não concorda

<b>Campo</b>	B72_TPINCO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Inconsist
<b>Descrição</b>	Tipo de Inconsistência
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_DETPIC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Tp Inco
<b>Descrição</b>	Descrição do Tp de Incons
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_INFPRO
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Info. Proced
<b>Descrição</b>	Informacao do Procediment

<b>Campo</b>	B72_OBSISA
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Obs. Saúde
<b>Descrição</b>	Observação Inter Saúde
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_SEQPRO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Seq Proc
<b>Descrição</b>	Sequencia do Procedimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_CODPAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tabela
<b>Descrição</b>	Código da Tabela
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_CODPRO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Procedimento
<b>Descrição</b>	Código do Procedimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_DESPRO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	50
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Desc. Proc.
<b>Descrição</b>	Descrição do Procedimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_CODGLO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Glosa
<b>Descrição</b>	Código da Glosa
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_DESGLO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	120
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Desc. Glosa
<b>Descrição</b>	Descrição da Glosa
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_PARECE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Parecer
<b>Descrição</b>	Parecer
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	0=Autorizado; 1=Negado; 2=Em Analise

<b>Campo</b>	B72_OBSANA
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Obs. Analis
<b>Descrição</b>	Observação da Analise
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_MOTIVO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Motivo
<b>Descrição</b>	Motivo
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_DESMOT
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	120
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Motivo
<b>Descrição</b>	Descrição do Motivo
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_VLRAUT
<b>Tipo</b>	N - Numérico
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	4
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.9999
<b>Título</b>	Vlr. Autori
<b>Descrição</b>	Valor Autorizado
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""



<b>Campo</b>	B72_QTDAUT
<b>Tipo</b>	N - Numérico
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	9999.99
<b>Título</b>	Qtd. Autori
<b>Descrição</b>	Qtd Autorizada
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_COPERE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador Sau
<b>Descrição</b>	Código Operador Saúde
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_NOPERE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Op Sau.
<b>Descrição</b>	Nome Operador Int Saúde
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B72_VIA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Via Acesso
<b>Descrição</b>	Via de Acesso
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	

<b>Campo</b>	B72_PERVIA
<b>Tipo</b>	N - Numérico
<b>Tamanho</b>	13
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.99
<b>Título</b>	% Via
<b>Descrição</b>	% da Via
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	

- Tabela B73 - Interna Saúde Complemento

<b>Campo</b>	B73_FILIAL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_ALIMOV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alias Relac
<b>Descrição</b>	Alias de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_RECMOV
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Recno Relac
<b>Descrição</b>	Recno de Relacionamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_SEQPRO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Seq Pro
<b>Descrição</b>	Sequencial Procedimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_CODGLO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Glosa
<b>Descrição</b>	Código da Glosa
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_SEQUEN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@
<b>Título</b>	Sequen
<b>Descrição</b>	Sequencial
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_DATMOV
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Dt. Moviment
<b>Descrição</b>	Data da Movimen
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Operador
<b>Descrição</b>	Código do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_NOMOPE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Operador
<b>Descrição</b>	Nome do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	B73_TPACAO
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp Ação
<b>Descrição</b>	Tipo de Ação
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	0=Alterada; 1=Nova Guia; 2=Concorda; 3=Não Concorda

<b>Campo</b>	B73_DESRES
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Resposta
<b>Descrição</b>	Resposta
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Opções</b>	""

- Ajuste tabela BCT - Motivos de Glosas

<b>Campo</b>	BCT_PROPRI
<b>Browse</b>	Sim

<b>Campo</b>	BCT_TIPO
<b>Box</b>	0=Operacional;1=Técnica;2=Administrativa

- Tabela BAU - Redes de Atendimento

<b>Campo</b>	BAU_ACEPAR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Aceita Part.
<b>Descrição</b>	Aceita Participativa
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BAU_ACEPAR
<b>Tipo</b>	C – Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Aceita Part.
<b>Descrição</b>	Aceita Participativa
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim;2=Sob Consulta

- Tabela BX4- Operadores x Instituições

<b>Campo</b>	BX4_PERAUD
<b>Tipo</b>	C – Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Perfil
<b>Descrição</b>	Descrição do Perfil
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Operacional;1=Técnica;2=Administrativa

<b>Campo</b>	BX4_CODDEP
<b>Tipo</b>	C – Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Depto
<b>Descrição</b>	Código do Depto
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX4_DESDEP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Depto
<b>Descrição</b>	Descrição do Depto
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX4_CODCAR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Cargo
<b>Descrição</b>	Código do Cargo
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""



<b>Campo</b>	BX4_DESCAR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	55
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Des. Cargo
<b>Descrição</b>	Descrição do Cargo
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX4_PROCES
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Demanda
<b>Descrição</b>	Per. Demanda
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

<b>Campo</b>	BX4_DIRDOC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	60
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Diret. Doc. Guias
<b>Descrição</b>	Diretório de documento de guias
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX4_INTSAU
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Interna-Saude
<b>Descrição</b>	Interna-Saude
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

<b>Campo</b>	BX4_ANOTAC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Anotacoes
<b>Descrição</b>	Anotacoes
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

<b>Campo</b>	BX4_MOTDOC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Monit. Doc. Guias
<b>Descrição</b>	Monitor de documento das guias
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

<b>Campo</b>	BX4_VISAUD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Visual. Aud.
<b>Descrição</b>	Visualiza Auditoria
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

<b>Campo</b>	BX4_ENCMIN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Encaminhamen
<b>Descrição</b>	Encaminhamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

<b>Campo</b>	BX4_PARTIC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Participativ
<b>Descrição</b>	Participativa
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

- Tabela BR8 - Tabela Padrão

<b>Campo</b>	BR8_PARTIC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Participativa
<b>Descrição</b>	Participativa
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

<b>Campo</b>	BR8_INFPRO
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	200
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Info. Proced
<b>Descrição</b>	Informacao do Procediment

<b>Campo</b>	BR8_REQUER
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Requerimento
<b>Descrição</b>	Requerimento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim

- Ajuste Tabela BEG - Autorizações Eventos Críticos

<b>Campo</b>	BEG_OPEMOV
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	BEG_ANOAUT
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	BEG_MESAUT
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	BEG_NUMAUT
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	BEG_SEQUEN
<b>Browse</b>	Sim

<b>Campo</b>	BEG_CODGLO
<b>Browse</b>	Sim

<b>Campo</b>	BEG_DESGLO
<b>Browse</b>	Sim

<b>Campo</b>	BEG_INFGLO
<b>Browse</b>	Sim

<b>Campo</b>	BEG_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Operad
<b>Descrição</b>	Cod Ope Analise
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BEG_PENDEN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Pendente
<b>Descrição</b>	Pendente
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

- Tabela BEJ - Itens Autorização Internação

<b>Campo</b>	BEJ_VLRAPR
<b>Tipo</b>	N - Numérico
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Valor Pagto
<b>Descrição</b>	Valor Pagamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

- Tabela BQV - Evolução das Diárias

<b>Campo</b>	BQV_VLRAPR
<b>Tipo</b>	N - Numérico
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Valor Pagto
<b>Descrição</b>	Valor Pagamento
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BQV_DESPRO
<b>Tamanho</b>	50

- Tabela BQZ - Críticas da Evolução de Diária

<b>Campo</b>	BQZ_CODOPE
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	BQZ_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Operad
<b>Descrição</b>	Cod Ope Analise
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BQZ_PENDEN
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Pendente
<b>Descrição</b>	Pendente
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não; 1=Sim

- Tabela BX3 - Log de Utilização de Rotina

<b>Campo</b>	BX3_FILIAL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""



<b>Campo</b>	BX3_ALIAS
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Alias
<b>Descrição</b>	Alias
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX3_OPERAD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Operad
<b>Descrição</b>	Código do Operador
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX3_DATA
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@D
<b>Título</b>	Data
<b>Descrição</b>	Data
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX3_HORA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Hora
<b>Descrição</b>	Hora
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

<b>Campo</b>	BX3_TIPO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo
<b>Descrição</b>	Tipo
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Acesso; 1=Registro

<b>Campo</b>	BX3_ESTTRB
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Estação Trab
<b>Descrição</b>	Estação de trabalho
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Opções</b>	""

3. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão.
- Pesquisa B7MPLS - Usuários Protheus

<b>Alias</b>	B7MPLS
<b>Tipo</b>	1- Consulta
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Usuários Protheus
<b>Contém</b>	BX4

<b>Alias</b>	B7MPLS
<b>Tipo</b>	2- Ordens
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	""
<b>Contém</b>	""

<b>Alias</b>	B7MPLS
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Código
<b>Contém</b>	BX4->BX4_CODOPE

<b>Alias</b>	B7MPLS
<b>Tipo</b>	4- Colunas
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contém</b>	USRRETNAME(BX4->BX4_CODOPE)

<b>Alias</b>	B7MPLS
<b>Tipo</b>	5- Retorno
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	""
<b>Contém</b>	BX4->BX4_CODOPE

<b>Alias</b>	B7MPLS
<b>Tipo</b>	6- Filtro
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	""
<b>Descrição</b>	""
<b>Contém</b>	BX4->BX4_CODDEP == M->B70_CODDEP .AND. BX4->BX4_CODCAR == M->B70_CODCAR

#### 4. Criação ou Alteração de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

- Tabela B70 – Participativa

<b>Campo</b>	B70_COPAGE
<b>Sequência</b>	001
<b>Regra</b>	USRRETNAME(M->B70_COPAGE)
<b>Campo Domínio</b>	B70_NOPAGE
<b>Tipo</b>	P – Primário
<b>Posiciona?</b>	S
<b>Proprietário</b>	Sim

#### 5. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

<b>Índice</b>	B46
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	B46_FILIAL + B46_OPEMOV+ B46_ANOAUT + B46_MESAUT + B46_NUMAUT + B46_SEQUEN + B46_CODGLO + B46_DESGLO
<b>Descrição</b>	Operadora + Ano + Mês + Número + Sequen + CodGlo + DesGlo
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
<b>Descrição</b>	Número da Guia + Origem Movto
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_MATUSU
<b>Descrição</b>	Matricula do Usuário
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_CODOPE + B53_CODLDP + B53_CODPEG + B53_NUMERO + B53_ORIMOV
<b>Descrição</b>	Operadora + Local + Peg + Número + Orimov
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	4
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_ALIMOV + B53_RECMOV
<b>Descrição</b>	Alias Mov + Recno Mov
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	5
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_PRIORI + B53_DATMOV + B53_HORMOV
<b>Descrição</b>	Prioridade + Data Mov + Hora Mov

Proprietário	Sim
Índice	B53
Ordem	6
Chave	B53_FILIAL + B53_DATMOV + B53_HORMOV + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Data Mov + Hora Mov + Número da Guia + Origem
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	7
Chave	B53_FILIAL + B53_SITUAC + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Analisada + Número da Guia + Origem
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	8
Chave	B53_FILIAL + B53_PARTIC + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Participativa + Número da Guia + Origem
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	9
Chave	B53_FILIAL + B53_DEMAND + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Demanda + Número da Guia + Origem
Proprietário	Sim

Índice	B53
Ordem	A
Chave	B53_FILIAL + B53_ENCAMI + B53_NUMGUI + B53_ORIMOV
Descrição	Encaminhada + Número da Guia + Origem
Proprietário	Sim

<b>Índice</b>	B53
<b>Ordem</b>	B
<b>Chave</b>	B53_FILIAL + B53_NOMUSR
<b>Descrição</b>	Nome de Usuario
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B68
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B68_FILIAL + B68_ALIMOV + B68_RECNOV + B68_NUMPRC + B68_TPPROC
<b>Descrição</b>	Alias Mov + Recno Mov + Número do processo + Tp Processo
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B69
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B69_FILIAL + B69_ALIMOV + B69_RECNOV + B69_SEQUEN
<b>Descrição</b>	Alias Mov + Recno Mov + Sequencial
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B70
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B70_FILIAL + B70_ALIMOV + B70_RECNOV + B70_SEQUEN
<b>Descrição</b>	Alias Mov + Recno Mov + Sequencial
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B71
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B71_FILIAL + B71_ALIMOV + B71_RECNOV + B71_SEQUEN
<b>Descrição</b>	Alias Mov + Recno Mov + Sequencial
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B72
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B72_FILIAL + B72_ALIMOV + B72_RECMOV + B72_SEQPRO + B72_CODGLO + B72_CODPAD + B72_CODPRO
<b>Descrição</b>	Alias Mov + Recno Mov + Seq Procedimento + Glosa + Tabela + Procedimen
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B72
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	B72_FILIAL + B72_SEQPRO + B72_CODGLO + B72_CODPAD + B72_CODPRO + B72_ALIMOV + B72_RECMOV
<b>Descrição</b>	Seq Procedimento + Glosa + Tabela + Procedimento + Alias Mov + Recno M
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B72
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	B72_FILIAL + B72_ALIMOV + B72_RECMOV + B72_PARECE
<b>Descrição</b>	Alias Mov + Recno Mov + Parecer
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	B73
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	B73_FILIAL + B73_ALIMOV + B73_RECMOV + B73_SEQPRO + B73_SEQUEN + B73_CODGLO
<b>Descrição</b>	Alias Mov + Recno Mov + Sequencial + Glosa
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	BEG
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	BEG_FILIAL + BEG_OPEMOV + BEG_ANOAUT + BEG_MESAUT + BEG_NUMAUT + BEG_SEQUEN + BEG_CODGLO + BEG_DESGLO
<b>Descrição</b>	Operadora + Ano + Mes + Numero + Sequen + Glosa + Descrição
<b>Proprietário</b>	Sim



<b>Índice</b>	BQZ
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	BQZ_FILIAL + BQZ_CODOPE + BQZ_ANOINT + BQZ_MESINT + BQZ_NUMINT + BQZ_SEQUEN + BQZ_CODGLO + BQZ_DESGLO
<b>Descrição</b>	Operadora + Ano + Mes + Numero + Sequen + Glosa + Descrição
<b>Proprietário</b>	Sim

<b>Índice</b>	BX3
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	BX3_FILIAL + BX3_OPERAD + BX3_TIPO + BX3_ALIAS
<b>Descrição</b>	CodOpe + Tipo + Alias
<b>Proprietário</b>	Sim

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	B53 – Auditoria de Guias BX3 - Log de Utilização de Rotina B68 – Demanda B69 – Notações B70 – Participativa B71 – Encaminhamento B72 – Interna Saúde B73 – Interna Saúde Complemento
<b>Rotinas Envolvidas</b>	Auditoria Por Guia (PLSA790V)
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux